

Cadastro e Configuração de Layout de Canais


Neste guia daremos sequência ao módulo de certificados, desta vez, abordando o cadastro e a configuração do Layout de Canais, que serão necessários para o recebimento dos certificados.

MÓDULO

Metrologia | Certificados

CAMINHO PADRÃO

Menu SS -> Certificados V2 -> Gestor de Layout de Canais -> Listagem

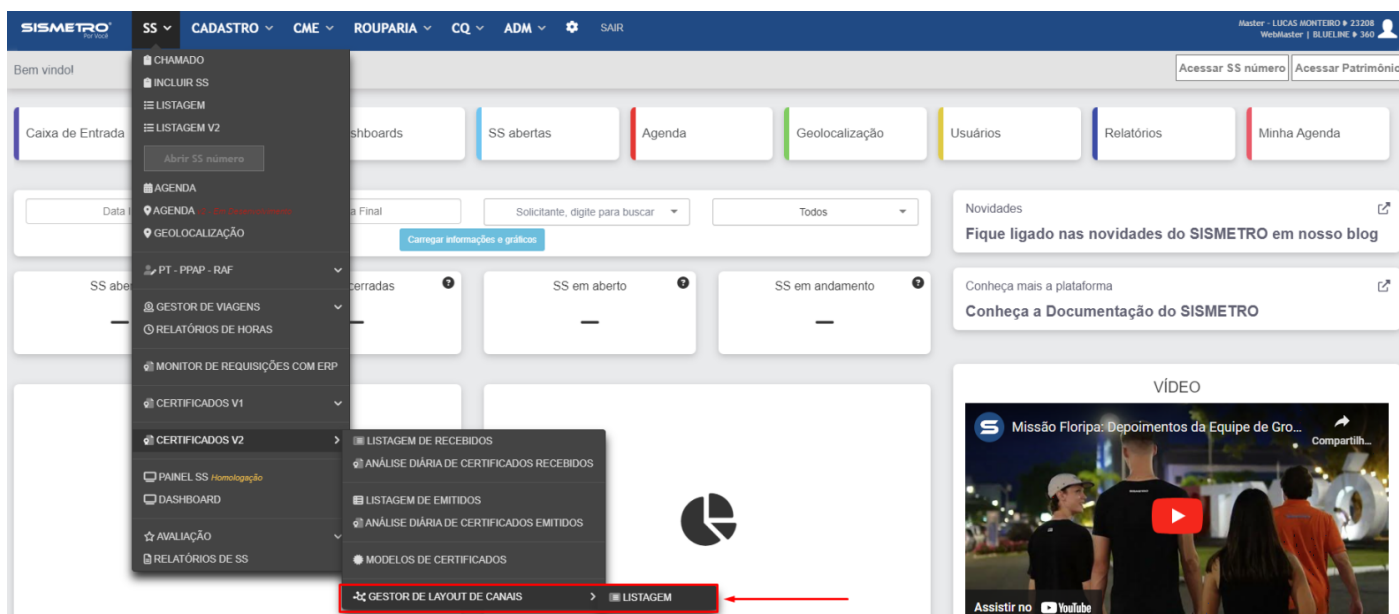

CADASTRO E CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT DE CANAIS

Para cadastrar um novo layout de canal, siga os passos abaixo:

1. Clique no botão "Adicionar" no canto superior direito da listagem de layouts;

SISMETRO[®] Por Você

SS CADASTRO CME ROUPARIA CQ ADM SAIR

Master - LUCAS MONTEIRO 23208
WebMaster | BLUELINE 360

CERTIFICADO V2 GESTOR DE LAYOUT DE CANAIS LISTAGEM 2 itens

ADICIONAR

ATIVOS ID Layout Busca por nome 50 Filtrar

| ID | Data | Nome layout | Usuário | Canais | Tipos liberados | Ação |
|-----|------------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|------|
| 237 | 08/12/2023 11:25 | TEMPERATURA | GABRIEL BORGES | 2 | 2 | |
| 112 | 08/12/2023 11:05 | PRESSAO POSITIVA | MASTER SISMETRO | 3 | 2 | |

2. Crie um nome para o novo layout de canal, em seguida, clique em salvar;

CERTIFICADO V2 GESTOR DE LAYOUT DE CANAIS INCLUIR

VOLTAR SALVAR

Dados cadastrais

Nome do layout
LAYOUT DE CANAL TESTE

3. Após a conclusão, clique em "COMPLEMENTAR";

SISMETRO[®] Por Você

SS CADASTRO CME ROUPARIA CQ ADM SAIR

Master - LUCAS MONTEIRO 23208
WebMaster | BLUELINE 360

CERTIFICADO V2 GESTOR DE LAYOUT DE CANAIS INCLUIR

VOLTAR

Dados cadastrais

Nome do layout
LAYOUT DE CANAL TESTE

CONCLUÍDO!

COMPLEMENTAR INCLUIR OUTRO VOLTAR

4. Adicione canais ao layout através do botão "Adicionar canal";

SISMETRO[®] Por Você

SS CADASTRO CME ROUPARIA CQ ADM SAIR

Master - LUCAS MONTEIRO 23208
WebMaster | BLUELINE 360

CERTIFICADO V2 GESTOR DE LAYOUT DE CANAIS Editando: 524

VOLTAR SALVAR

Dados cadastrais

Incluir: Master - LUCAS MONTEIRO (WebMaster) 23/12/2024 14:34

Nome do layout
LAYOUT DE CANAL TESTE

☐ Ativos ☐ Inativos ☐ Excluídos ☐ Não configurados

| ID | Nome do Canal | Unidade de medida | Tolerância | Tipo Tolerância | Valor Tolerância | Validade em meses | Ação |
|----|---------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|-------------------|------|
|----|---------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|-------------------|------|

Adicionar canal

5. Após a adição dos canais, você poderá configurá-los de acordo com a necessidade de cada equipamento a ser calibrado, alterando o nome, a unidade de medida, a tolerância e a validade de cada canal.

Após configurar as informações de cada canal, você deverá salvá-los clicando no botão ;

SISMETRO Por Você

SS CADASTRO CME ROUPARIA CQ ADM SAIR

Master - LUCAS MONTEIRO 23/12/2024 14:34

CERTIFICADO V2 GESTOR DE LAYOUT DE CANAIS Editando: 524







Dados cadastrais


Incluir: Master - LUCAS MONTEIRO (WebMaster) 23/12/2024 14:34

Nome do layout
LAYOUT DE CANAL TESTE

☐ Ativos ☐ Inativos ☐ Excluídos ☐ Não configurados

Adicionar canal

| ID | Nome do Canal | Unidade de medida | Tolerância | Tipo Tolerância | Valor Tolerância | Validade em meses | Ação |
|-----|---------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|-------------------|---|
| 974 | NOVO CANAL 1 | BAR bar | LIVRE | Selecione | | 0 |   |
| 975 | NOVO CANAL 2 | GRAUS CELSIUS °C | LIVRE | Selecione | | 0 |   |
| 976 | NOVO CANAL 3 | QUILOGRAMA kg | LIVRE | Selecione | | 0 |   |

6. Inclua os tipos de tecnologia para o layout de canal desejado através da aba  (Tipos de Tecnologia liberados) na barra lateral esquerda;

SISMETRO Por Você

SS CADASTRO CME ROUPARIA CQ ADM SAIR

Master - LUCAS MONTEIRO 23/12/2024 14:34

CERTIFICADO V2 GESTOR DE LAYOUT DE CANAIS Editando: 524

Tipos de tecnologia liberados

Incluir tipo de tecnologia

apar


OK

0 itens

APARELHO DE ANESTESIA
SISTEMA DE ANESTESIA - CABO DE ANESTESIA 26

Usuário / Data ID Tipo Tipo de tecnologia Vincular Automaticamente Ação

Atualizar Vínculos

7. Libere as filiais e solicitantes permitidos ao uso do layout a ser configurado através da aba  (Solicitantes permitidos) na barra lateral esquerda;

SISMETRO Por Você

SS CADASTRO CME ROUPARIA CQ ADM SAIR

Master - LUCAS MONTEIRO 23/12/2024 14:34

CERTIFICADO V2 GESTOR DE LAYOUT DE CANAIS Editando: 524

Solicitantes permitidos

Incluir solicitante

1. MATRIZ - HOSPITAL BLUE LINE SP

Permitir todos da filial

Permitir solicitante

Digite para buscar

TODOS 0

1. LABORATORIO DE CALIBRACAO 232942

1. MATRIZ - HOSPITAL BLUE LINE SP 31.809.657/0001-28

3. SISMETRO EQUIPAMENTOS 251562

1. MATRIZ - HOSPITAL BLUE LINE SP 28.174.552/0001-35

HOSPITAL RONDON 232844

1. MATRIZ - HOSPITAL BLUE LINE SP 31.809.657/0001-28

TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TI 232944

1. MATRIZ - HOSPITAL BLUE LINE SP 31.809.657/0001-28

Data Filial Usuário Ação

VINCULANDO LAYOUT DE CANAL À UM PATRIMÔNIO

8. Uma vez que a configuração for concluída, o próximo passo será liberar o layout dentro do cadastro do patrimônio desejado:

SISMETRO

SS

CADASTRO

CME

ROUPARIA

CQ

ADM

SAIR

Master - LUCAS MONTEIRO

WebMaster | BLUMLINE

CADASTRO PATRIMÔNIO 794061

LINK TECMOBILE

LINK TECMOBILE (SMTR.IO)

LISTA DE PARADAS

LISTA DE SS

PANEL MI

VOLTAR

ABRIR SS

SALVAR

Acessórios/Cabos/Details:

B

i

PLANOS VINCULADOS

CONTROLES

ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES

CALIBRAÇÃO

AQUISIÇÃO / BAIXA

DOCUMENTOS

BIBLIOTECA

IoT

LINHAS DE PRODUÇÃO

PRODUÇÃO

RASTREABILIDADE

É Padrão de Calibração

Não

Confirmar

Layout de canais para calibração: Definir layout

LISTA DE CANAIS DO LAYOUT SELECIONADO

| ID | Nome do Canal | Unidade de medida | Tolerância | Tipo Tolerância | Valor Tolerância | Validade em meses | Faixa de calibração |
|----|---------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | |

Ao seguir esses passos, é possível cadastrar e configurar layouts de canais, e incluí-los à um patrimônio para o posterior recebimento de um certificado de calibração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de suporte.

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

https://www.youtube.com/embed/LvvE3r3yexs?si=rdLtTcmX9b4qebXA

DÚVIDAS

| Dúvida | Solução | Direitos |
|---|---|------------|
| Por que não consigo visualizar o menu de Layouts de Canais? | Usuário sem permissão. Será necessário a liberação de direitos especiais pelo administrador da unidade. | 657 |
| Botão adicionar não aparece na listagem de layouts. | Usuário sem permissão. Será necessário a liberação de direitos especiais pelo administrador da unidade. | 658 |
| Não consigo incluir um layout à um patrimônio. | Usuário sem permissão. Será necessário a liberação de direitos especiais pelo administrador da unidade. | 519 695 |
| Como faço para gerar o recebimento dos certificados? | Clique no botão abaixo para visualizar a página seguinte! | - |

Revisão #25

Criado 31 October 2024 10:52:59 por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado 27 December 2024 14:46:17 por Lucas Monteiro