

Cadastro e Configuração de Layout de Canais


Neste guia daremos sequência ao módulo de certificados, desta vez, abordando o cadastro e a configuração do Layout de Canais, que serão necessários para o recebimento dos certificados.

MÓDULO

Metrologia | Certificados

CAMINHO PADRÃO

Menu SS -> Certificados V2 -> Gestor de Layout de Canais -> Listagem

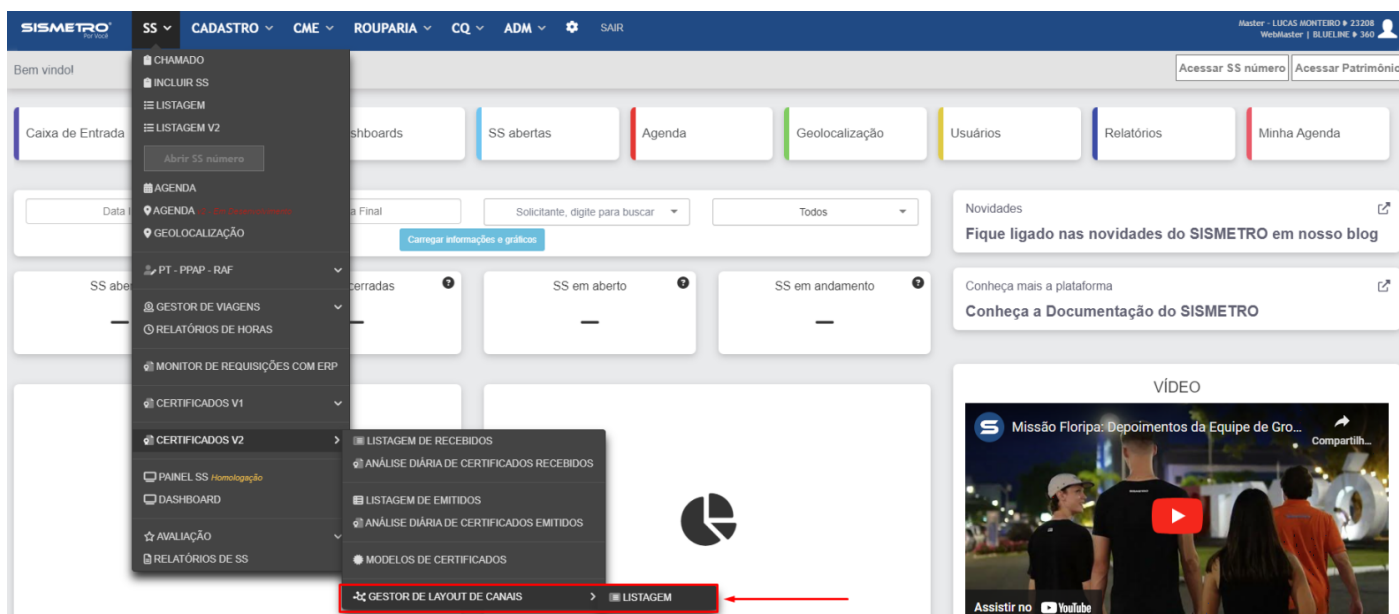

CADASTRO E CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT DE CANAIS

Para cadastrar um novo layout de canal, siga os passos abaixo:

1. Clique no botão "Adicionar" no canto superior direito da listagem de layouts;

SISMETRO[®] Por Você

SS CADASTRO CME ROUPARIA CQ ADM SAIR

Master - LUCAS MONTEIRO 23208
WebMaster | BLUELINE 360

CERTIFICADO V2 GESTOR DE LAYOUT DE CANAIS LISTAGEM 2 itens

ADICIONAR

ATIVOS ID Layout Busca por nome 50 Filtrar

ID	Data	Nome layout	Usuário	Canais	Tipos liberados	Ação
237	08/12/2023 11:25	TEMPERATURA	GABRIEL BORGES	2	2	
112	08/12/2023 11:05	PRESSAO POSITIVA	MASTER SISMETRO	3	2	

2. Crie um nome para o novo layout de canal, em seguida, clique em salvar;

CERTIFICADO V2 GESTOR DE LAYOUT DE CANAIS INCLUIR

VOLTAR SALVAR

Dados cadastrais

Nome do layout
LAYOUT DE CANAL TESTE

3. Após a conclusão, clique em "COMPLEMENTAR";

SISMETRO[®] Por Você

SS CADASTRO CME ROUPARIA CQ ADM SAIR

Master - LUCAS MONTEIRO 23208
WebMaster | BLUELINE 360

CERTIFICADO V2 GESTOR DE LAYOUT DE CANAIS INCLUIR

VOLTAR

Dados cadastrais

Nome do layout
LAYOUT DE CANAL TESTE

CONCLUÍDO!

COMPLEMENTAR INCLUIR OUTRO VOLTAR

4. Adicione canais ao layout através do botão "Adicionar canal";

SISMETRO[®] Por Você

SS CADASTRO CME ROUPARIA CQ ADM SAIR

Master - LUCAS MONTEIRO 23208
WebMaster | BLUELINE 360

CERTIFICADO V2 GESTOR DE LAYOUT DE CANAIS Editando: 524

VOLTAR SALVAR

Dados cadastrais

Incluir: Master - LUCAS MONTEIRO (WebMaster) 23/12/2024 14:34

Nome do layout
LAYOUT DE CANAL TESTE

☐ Ativos ☐ Inativos ☐ Excluídos ☐ Não configurados

ID	Nome do Canal	Unidade de medida	Tolerância	Tipo Tolerância	Valor Tolerância	Validade em meses	Ação
----	---------------	-------------------	------------	-----------------	------------------	-------------------	------

Adicionar canal

5. Após a adição dos canais, você poderá configurá-los de acordo com a necessidade de cada equipamento a ser calibrado, alterando o nome, a unidade de medida, a tolerância e a validade de cada canal.

Após configurar as informações de cada canal, você deverá salvá-los clicando no botão ;







SISMETRO Por Você **SS** **CADASTRO** **CME** **ROUPARIA** **CQ** **ADM** **SAIR** Master - LUCAS MONTEIRO 23/12/2024 14:34 WebMaster | BLUELINE 360


CERTIFICADO V2 GESTOR DE LAYOUT DE CANAIS Editando: 524 **VOLTAR** **SALVAR**

Dados cadastrais
Incluir: Master - LUCAS MONTEIRO (WebMaster) 23/12/2024 14:34

Nome do layout
LAYOUT DE CANAL TESTE

☐ Ativos ☐ Inativos ☐ Excluídos ☐ Não configurados **Adicionar canal**


ID	Nome do Canal	Unidade de medida	Tolerância	Tipo Tolerância	Valor Tolerância	Validade em meses	Ação
974	NOVO CANAL 1	BAR bar	LIVRE	Selecione		0	 
975	NOVO CANAL 2	GRAUS CELSIUS °C	LIVRE	Selecione		0	 
976	NOVO CANAL 3	QUILOGRAMA kg	LIVRE	Selecione		0	 

6. Inclua os tipos de tecnologia para o layout de canal desejado através da aba  (Tipos de Tecnologia liberados) na barra lateral esquerda;

SISMETRO Por Você **SS** **CADASTRO** **CME** **ROUPARIA** **CQ** **ADM** **SAIR** Master - LUCAS MONTEIRO 23/12/2024 14:34 WebMaster | BLUELINE 360

CERTIFICADO V2 GESTOR DE LAYOUT DE CANAIS Editando: 524 **VOLTAR** **SALVAR**

Tipos de tecnologia liberados

 **Incluir tipo de tecnologia**


apar **OK**

APARELHO DE ANESTESIA
SISTEMA DE ANESTESIA - CABO DE ANESTESIA 26

0 itens

Usuário / Data	ID Tipo	Tipo de tecnologia	Vincular Automaticamente	Ação
----------------	---------	--------------------	--------------------------	------


Atualizar Vínculos

7. Libere as filiais e solicitantes permitidos ao uso do layout a ser configurado através da aba  (Solicitantes permitidos) na barra lateral esquerda;

SISMETRO Por Você **SS** **CADASTRO** **CME** **ROUPARIA** **CQ** **ADM** **SAIR** Master - LUCAS MONTEIRO 23/12/2024 14:34 WebMaster | BLUELINE 360

CERTIFICADO V2 GESTOR DE LAYOUT DE CANAIS Editando: 524 **VOLTAR** **SALVAR**

Solicitantes permitidos

 **Incluir solicitante**

1. MATRIZ - HOSPITAL BLUE LINE SP **Permitir todos da filial**

Permitir solicitante

Digite para buscar

TODOS 0

1. LABORATORIO DE CALIBRACAO	232942
1. MATRIZ - HOSPITAL BLUE LINE SP	31.809.657/0001-28
3. SISMETRO EQUIPAMENTOS	251562
1. MATRIZ - HOSPITAL BLUE LINE SP	28.174.552/0001-35
HOSPITAL RONDON	232844
1. MATRIZ - HOSPITAL BLUE LINE SP	31.809.657/0001-28
TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TI	232944
1. MATRIZ - HOSPITAL BLUE LINE SP	31.809.657/0001-28

Usuário	Ação
---------	------

VINCULANDO LAYOUT DE CANAL À UM PATRIMÔNIO

8. Uma vez que a configuração for concluída, o próximo passo será liberar o layout dentro do cadastro do patrimônio desejado:

SISMETRO

SS

CADASTRO

CME

ROUPARIA

CQ

ADM

SAIR

Master - LUCAS MONTEIRO

WebMaster | BLUMLINE

CADASTRO PATRIMÔNIO 794061

LINK TECMOBILE

LINK TECMOBILE (SMTR.IO)

LISTA DE PARADAS

LISTA DE SS

PANEL MI

VOLTAR

ABRIR SS

SALVAR

Acessórios/Cabos/Details:

B

i

PLANOS VINCULADOS

CONTROLES

ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES

CALIBRAÇÃO

AQUISIÇÃO / BAIXA

DOCUMENTOS

BIBLIOTECA

IoT

LINHAS DE PRODUÇÃO

PRODUÇÃO

RASTREABILIDADE

É Padrão de Calibração

Não

Confirmar

Layout de canais para calibração: Definir layout

LISTA DE CANAIS DO LAYOUT SELECIONADO

ID	Nome do Canal	Unidade de medida	Tolerância	Tipo Tolerância	Valor Tolerância	Validade em meses	Faixa de calibração

Ao seguir esses passos, é possível cadastrar e configurar layouts de canais, e incluí-los à um patrimônio para o posterior recebimento de um certificado de calibração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de suporte.

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

<https://www.youtube.com/embed/LvvE3r3yexs?si=rdLtTcmX9b4qebXA>

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direitos
Por que não consigo visualizar o menu de Layouts de Canais?	Usuário sem permissão. Será necessário a liberação de direitos especiais pelo administrador da unidade.	657
Botão adicionar não aparece na listagem de layouts.	Usuário sem permissão. Será necessário a liberação de direitos especiais pelo administrador da unidade.	658
Não consigo incluir um layout à um patrimônio.	Usuário sem permissão. Será necessário a liberação de direitos especiais pelo administrador da unidade.	519 695
Como faço para gerar o recebimento dos certificados?	Clique no botão abaixo para visualizar a página seguinte!	-

Revisão #25

Criado 31 October 2024 10:52:59 por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado 27 December 2024 14:46:17 por Lucas Monteiro