

Cadastro e Configuração de Layout de Canais


Neste guia daremos sequência ao módulo de certificados, desta vez, abordando o cadastro e a configuração do Layout de Canais, que serão necessários para o recebimento dos certificados.

MÓDULO

Metrologia | Certificados

CAMINHO PADRÃO

Menu SS -> Certificados V2 -> Gestor de Layout de Canais -> Listagem

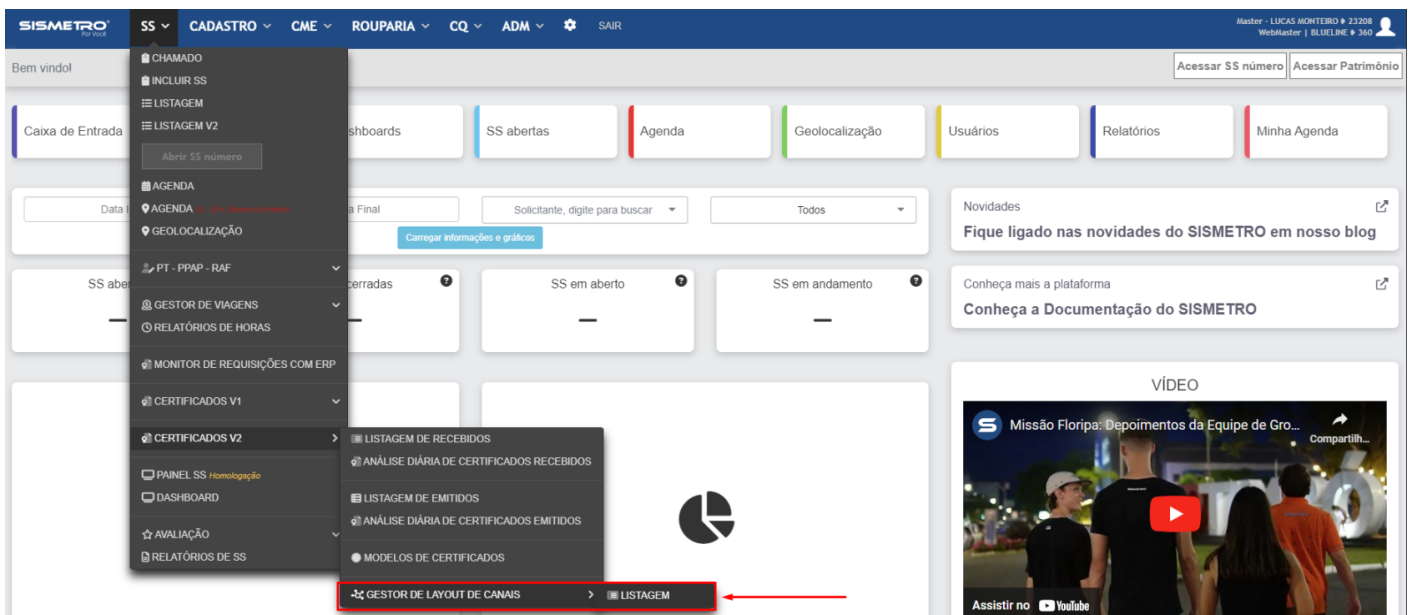

CADASTRO E CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT DE CANAIS

Para cadastrar um novo layout de canal, siga os passos abaixo:

1. Clique no botão "Adicionar" no canto superior direito da listagem de layouts;

SISMETRO Por Você SS CADASTRO CME ROUPARIA CQ ADM SAIR Master - LUCAS MONTEIRO 23208 WebMaster | BLUELINE 360

CERTIFICADO V2 GESTOR DE LAYOUT DE CANAIS LISTAGEM 2 itens ADICIONAR

ATIVOS ID Layout Busca por nome 50 Filtrar

ID	Data	Nome layout	Usuário	Canais	Tipos liberados	Ação
237	08/12/2023 11:25	TEMPERATURA	GABRIEL BORGES	2	2	
112	08/12/2023 11:05	PRESSAO POSITIVA	MASTER SISMETRO	3	2	

2. Crie um nome para o novo layout de canal, em seguida, clique em salvar;

CERTIFICADO V2 GESTOR DE LAYOUT DE CANAIS INCLUIR VOLTAR SALVAR

Dados cadastrais

Nome do layout
LAYOUT DE CANAL TESTE

3. Após a conclusão, clique em "COMPLEMENTAR";

SISMETRO Por Você SS CADASTRO CME ROUPARIA CQ ADM SAIR Master - LUCAS MONTEIRO 23208 WebMaster | BLUELINE 360

CERTIFICADO V2 GESTOR DE LAYOUT DE CANAIS INCLUIR VOLTAR

Dados cadastrais

Nome do layout
LAYOUT DE CANAL TESTE

CONCLUÍDO!

COMPLEMENTAR INCLUIR OUTRO VOLTAR

4. Adicione canais ao layout através do botão "Adicionar canal";

SISMETRO Por Você SS CADASTRO CME ROUPARIA CQ ADM SAIR Master - LUCAS MONTEIRO 23208 WebMaster | BLUELINE 360

CERTIFICADO V2 GESTOR DE LAYOUT DE CANAIS Editando: 524 VOLTAR SALVAR

Dados cadastrais

Incluir: Master - LUCAS MONTEIRO (WebMaster) 23/12/2024 14:34


Nome do layout
LAYOUT DE CANAL TESTE

Ativos Inativos Excluídos Não configurados

ID	Nome do Canal	Unidade de medida	Tolerância	Tipo Tolerância	Valor Tolerância	Validade em meses	Ação
----	---------------	-------------------	------------	-----------------	------------------	-------------------	------

Adicionar canal

5. Após a adição dos canais, você poderá configurá-los de acordo com a necessidade de cada equipamento a ser calibrado, alterando o nome, a unidade de medida, a tolerância e a validade de cada canal.

Após configurar as informações de cada canal, você deverá salvá-los clicando no botão  ;

SISMETRO **SS** CADASTRO CME ROUPARIA CQ ADM SAIR Master - LUCAS MONTEIRO # 23208 WebMaster | BLUELINE # 360

CERTIFICADO V2 GESTOR DE LAYOUT DE CANAIS Editando: 524 [VOLTAR] [SALVAR]


Dados cadastrais

Incluir: Master - LUCAS MONTEIRO (WebMaster) 23/12/2024 14:34

Nome do layout
LAYOUT DE CANAL TESTE

Ativos Inativos Excluídos Não configurados [Adicionar canal]

ID	Nome do Canal	Unidade de medida	Tolerância	Tipo Tolerância	Valor Tolerância	Validade em meses	Ação
974	NOVO CANAL 1	BAR bar	LIVRE	Selecione		0	[+]
975	NOVO CANAL 2	GRAUS CELSIUS °C	LIVRE	Selecione		0	[+]
976	NOVO CANAL 3	QUILOGRAMA kg	LIVRE	Selecione		0	[+]

6. Inclua os tipos de tecnologia para o layout de canal desejado através da aba  (Tipos de Tecnologia liberados) na barra lateral esquerda;

SISMETRO **SS** CADASTRO CME ROUPARIA CQ ADM SAIR Master - LUCAS MONTEIRO # 23208 WebMaster | BLUELINE # 360

CERTIFICADO V2 GESTOR DE LAYOUT DE CANAIS Editando: 524 [VOLTAR] [SALVAR]

Tipos de tecnologia liberados


0 itens

Incluir tipo de tecnologia

apar [OK]

APARELHO DE ANESTESIA 26
SISTEMA DE ANESTESIA, CABRO DE ANESTESIA

Usuário / Data	ID Tipo	Tipo de tecnologia	Vincular Automaticamente	Ação
				[Atualizar Vínculos]

7. Libere as filiais e solicitantes permitidos ao uso do layout a ser configurado através da aba  (Solicitantes permitidos) na barra lateral esquerda;

SISMETRO **SS** CADASTRO CME ROUPARIA CQ ADM SAIR Master - LUCAS MONTEIRO # 23208 WebMaster | BLUELINE # 360

CERTIFICADO V2 GESTOR DE LAYOUT DE CANAIS Editando: 524 [VOLTAR] [SALVAR]

Solicitantes permitidos

Incluir solicitante

1. MATRIZ - HOSPITAL BLUE LINE SP [Permitir todos da filial] [Permitir solicitante]

1. LABORATORIO DE CALIBRACAO 232942
1. MATRIZ - HOSPITAL BLUE LINE SP 31.809.657/0001-28

3. SISMETRO EQUIPAMENTOS 251562
1. MATRIZ - HOSPITAL BLUE LINE SP 28.174.552/0001-35

HOSPITAL RONDON 232844
1. MATRIZ - HOSPITAL BLUE LINE SP 31.809.657/0001-28

TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TI 232944
1. MATRIZ - HOSPITAL BLUE LINE SP 31.809.657/0001-28

Data	Filial	Usuário	Ação

VINCULANDO LAYOUT DE CANAL À UM PATRIMÔNIO

8. Uma vez que a configuração for concluída, o próximo passo será liberar o layout dentro do cadastro do patrimônio desejado:

Ao seguir esses passos, é possível cadastrar e configurar layouts de canais, e incluí-los à um patrimônio para o posterior recebimento de um certificado de calibração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de suporte.

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

<https://www.youtube.com/embed/LvvE3r3yexs?si=rdLtTcmX9b4qebXA>

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direitos
Por que não consigo visualizar o menu de Layouts de Canais?	Usuário sem permissão. Será necessário a liberação de direitos especiais pelo administrador da unidade.	657
Botão adicionar não aparece na listagem de layouts.	Usuário sem permissão. Será necessário a liberação de direitos especiais pelo administrador da unidade.	658
Não consigo incluir um layout à um patrimônio.	Usuário sem permissão. Será necessário a liberação de direitos especiais pelo administrador da unidade.	519 695
Como faço para gerar o recebimento dos certificados?	Clique no botão abaixo para visualizar a página seguinte!	-

Revisão #25

Criado 31 October 2024 10:52:59 por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado 27 December 2024 14:46:17