

# Etiquetas de Esterilização de CME

As etiquetas de identificação onde serão impressos os dados de processamento podem ser adquiridas de qualquer fornecedor. O *layout* com os dados de impressão é customizado para o cliente. A SISMETRO não comercializa etiquetas de esterilização. As mesmas deverão ser compatíveis (tamanho e material) com a impressora utilizada.

## MÓDULO

Gestão Inteligente de Esterilização.

## LAYOUT DE IMPRESSÃO

É o conjunto de dados e o formato (disposição) que serão impressos. O *layout* pode ser customizável para o cliente para qualquer tamanho de etiqueta, porém a SISMETRO recomenda o tamanho padrão.

## ETIQUETA RECOMENDADA PARA VAPOR

Etiqueta 35 mm x 70 mm dupla face ISO Classe I;

ou


Etiqueta 35 mm x 90 mm dupla face ISO Classe I;

Estas etiquetas permitem ser destacadas do rolo e fixadas no pacote e posteriormente destacadas do pacote e fixadas atrás do prontuário.



*Etiqueta dupla camada ISO Classe I*

Etiquetas com marcadores ou identificadores ISO Classe I alteram sua coloração (geralmente de rosa para marrom) após submetidos a esterilização semelhantes a fita indicadora (zebrada).

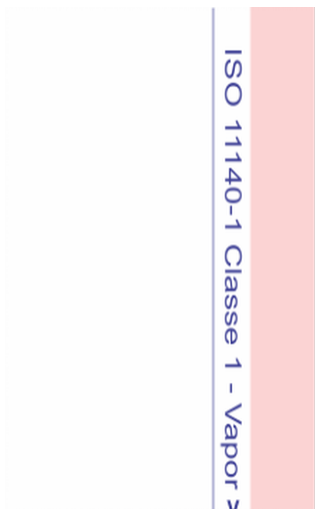

*Lateral de etiqueta de esterilização ISO Classe I*

## **ETIQUETAS PARA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO**

Deve ser utilizado *ribbon* de resina para alta temperatura (Não deve ser utilizado ribbon de cera).

---

Revisão #4

Criado 13 May 2019 18:01:32 por Alex França

Atualizado 9 December 2019 18:18:16 por Alex França