

# Configurações da CME

Material desenvolvido durante visita técnica na empresa Multilav Esterilizações

- Configuração de Kit Padrão travado por Data Matrix
- Cadastro de Patrimônio - Tipo de Tecnologia "Outro"
- Embalagem de Tecidos
- Material Consignado
- Configurações de ciclos da CME
- Configuração de Kit Padrão não rastreável
- Configurações básicas para Operador CME

# Configuração de Kit Padrão travado por Data Matrix

Criação e configuração de KIT Padrão com instrumental travado por Data Matrix na plataforma SISMETRO.

## MÓDULO

Gestão de Esterilização.

## PASSO A PASSO

Tipo de Tecnologia

PINÇA BACKHAUS 13CM

Categoria

MATERIAL CIRURGICO

Observação:

GUT - Gravidade

SEM GRAVIDADE

Filial

MULTILAV - UNIDADE RIBEIRAO PRETO

Solicitante: ?

MOVIMENTAÇÃO

HOSPITAL SAO LUCAS SA 18701

Localização

Filho de ?

Marca:

AD INSTRUMENTOS

ADD

Modelo:

-SEM MODELO-

ADD

Número de Série:

Nosso N° de Patrimônio:

TAG

Data Matrix / EAN

ML003853

TAG de Função

Av. de Qualidade:

BOA

Composição

METAL

Máx. de Esterilizações

## 1. CADASTRO DO MATERIAL CIRÚRGICO

### Caminho no Menu:

### Cadastro -> Patrimônio -> Listagem

- 1.1 Cadastrar o material como Patrimônio no Tipo de Tecnologia correspondente ao instrumento;
- 1.2 Selecionar no campo "Solicitante" e "Localização" o cadastro que corresponde como proprietário do material;
- 1.3 Selecionar no campo "Marca" e "Modelo" o cadastro que corresponde ao fabricante do material;
- 1.4 Identificar o adesivo *Data Matrix* do instrumental dentro do cadastro do Patrimônio no campo "Data Matrix / EAN";

1.5 Informar a "Av. de Qualidade" e "Composição" do material;

1.6 Se necessário, configurar o número máximo de esterilizações do material no campo "Máx. de Esterilizações";

1.7 Salvar cadastro.

CME KIT PADRÃO Editando 7791 VOLTAR Salvar versão

Nome do KIT  
CAIXA PC LARANJA/MARRON/AMARELA

Solicitante/Proprietário  
HOSPITAL SAO LUCAS SA

Localização

Código KIT's especiais Realizar Check final em sala!  
NÃO

Primeiro Invólucro Validade em dias  
SMS AUTOCLAVE 60

Segundo Invólucro Validade em dias

Terceiro Invólucro Validade em dias

Quarto Invólucro Validade em dias

Embalado pela  
EQUIPE DO CME

Armazenado em  
MULTILAV ESTERILIZACOES

ARSENAL

Medidas em milímetros  
Largura Altura Profundidade Litros  
300 700 160 = 33.6

Esterilização: Qualidade dos itens: Kit's prontos no Arsenal  
É obrigatória BOA 1 1

Permite divergência Alerta de não pertence ao kit  
NÃO PERMITE ITENS ADICIONAIS EXIBIR ALERTA

Impressão da etiqueta  
IMPRESSÃO COMPLETA DA ETIQUETA

2.  
Versão do KIT  
RODRIGO ADÃO DE SANTIS  
Incluiu: 24/02/2020 12:13  
Alterou: 24/02/2020 12:35

Sem Foto Destaque [Gerenciar Fotos](#)

Vincular POP  
Solicitante: MULTILAV ESTERILIZACOES  
Categoria  
POP

☒

[Rastreabilidade](#)

## 2. CONFIGURAÇÃO DO KIT PADRÃO

**Caminho no Menu:**

**CME -> Kit Padrão -> Adicionar**

2.1 Cadastrar a caixa como Kit Padrão de acordo com seus respectivos dados;

2.2 Identificar a micro etiqueta *Data Matrix* do *container* dentro do campo "Código";

2.3 No campo "Permite divergência" selecionar a opção "Não permite itens adicionais";



2.4 No campo "Alerta de não pertence ao kit" selecionar a opção "Exibir alerta";

2.5 Salvar cadastro.

Versão do Kit	Versão dos itens
Corresponde ao cadastro e configurações do Kit padrão	Corresponde aos materiais que compõem o Kit padrão

Para editar a "Versão do Kit", acesse a última versão disponível na janela de seleção.

Para editar a "Versão dos itens", acesse a última versão disponível na janela de seleção ou a opção "Montar Versão"

Foto	ID	Código	Versão do Kit	Dados do KIT Padrão	Solicitante / Proprietário	Ciclo e validade	Check final	Versão dos itens	Status
Sem Foto Destaque	7791		Atual 2	CAIXA PC LARANJA/MARRON/AMARELA EQUIPE DO CME Volume Litros: 33.6	HOSPITAL SAO LUCAS SA	SMS AUTOCLAVE Val: 60 dias			  MONTAR VERSÃO

### 3. CONFIGURAÇÃO DOS ITENS DO KIT

**Caminho no Menu:**

**CME -> Kit Padrão -> Versão dos itens do Kit -> Selecionar ou montar versão**

3.1 Certifique-se que o Kit está editável exibindo o botão "Liberar Versão";

3.2 Utilize o campo "*Data Matrix*" para identificar o código da micro etiqueta do instrumental;

3.3 Após identificar todos os materiais pertencentes ao Kit clique em "Liberar Versão" para que o Kit seja exibido na montagem da embalagem.

Nome do KIT:

CAIXA PC LARANJA/MARRON/AMARELA

Validade em DIAS: Local de embalagem:

60

EQUIPE DO CME

2

Total de itens

Rastreabilidade

.0

Versão dos itens

Liberar Versão

EDITANDO VERSÃO DOS ITENS DO KIT

Incluir material

Nome do material

Quantidade







ou

Datamatrix

OK

Quando inserido um item pelo datamatrix ele será exclusivo deste kit padrão!

Manu(item em manutenção) Temp(item temporário no KIT)

Item	Manu	Temp	Nome	Tipo	Datamatrix	Qtde	Ação
147638			PINCA KOCHER RETA 14 CM ID: 315593	355	ML003057		
147636			PINCA KOCHER RETA 14 CM ID: 166684	355	ML005281		

DÚVIDAS

Dúvida

Como editar um kit?

Solução

Cada edição contabiliza em uma nova versão do kit, ou seja, um momento kit não será editado, e sim elaborada uma nova versão do mesmo.

# Cadastro de Patrimônio - Tipo de Tecnologia "Outro"

Cadastro de instrumental cirúrgico na plataforma SISMETRO.

## MÓDULO

Gestão Inteligente de Esterilização.

## PASSO A PASSO

<b>Tipo de Tecnologia</b>		
OUTRO ▼		
<b>Categoria</b>		
MATERIAL CIRURGICO ▼		
Observação:		
<b>GUT - Gravidade</b>		
SEM GRAVIDADE ▼		
<b>Filial</b>		
ESTERILIZA GOIANIA		
<b>Solicitante:</b> ?		MOVIMENTAÇÃO
CME #134201		
<b>Localização</b>		
ARSENAL #9083		
<b>Filho de</b> ?		
<b>Marca:</b>		
-MARCA DESCONHECIDA- ▼		ADD
<b>Modelo:</b>		
-SEM MODELO- ▼		ADD
<b>Número de Série:</b>		
<b>Nosso N°. de Patrimônio:</b>	<b>TAG</b>	
<b>Data Matrix / EAN</b>	<b>TAG de Função</b>	
	▼	
<b>Av. de Qualidade:</b>	<b>Composição</b>	<b>Máx. de Esterilizações</b>
ÓTIMA ▼	OUTRO ▼	

## 1. CADASTRO DO MATERIAL CIRÚRGICO

### Caminho no Menu:

#### Cadastro -> Patrimônio -> Listagem

1.1 Cadastrar o material desejado como "Patrimônio" dentro do Tipo de Tecnologia correspondente ao instrumento;



1.2 Selecionar no campo "Solicitante" e "Localização" o cadastro que corresponde como proprietário do material;

1.3 Selecionar no campo "Marca" e "Modelo" o cadastro que corresponde ao fabricante do instrumento;

1.4 Informar a "Av. de Qualidade" e "Composição" do material;

1.5 Salvar cadastro.

# Embalagem de Tecidos

Criação e execução do procedimento de embalagem para tecidos na plataforma SISMETRO.

## MÓDULO

Gestão Inteligente de Esterilização.


## PASSO A PASSO

### 1. MONTAR KIT

**Caminho no Menu:**

**CME-> Embalagem-> Montar Kit**

- 1.1 Identifique o código do crachá no campo "Identificação do usuário";
- 1.2 Identifique o código da caixa / container no campo "Código do Kit" ou busque o Kit identificando os campos "Solicitante / Localização";
- 1.3 No campo "Montar Kit" deve ser selecionado o Kit padrão que será embalado;
- 1.4 Se necessário utilize o campo "Complemento ou observação sobre o kit";
- 1.5 Clique no botão "Iniciar Montagem".

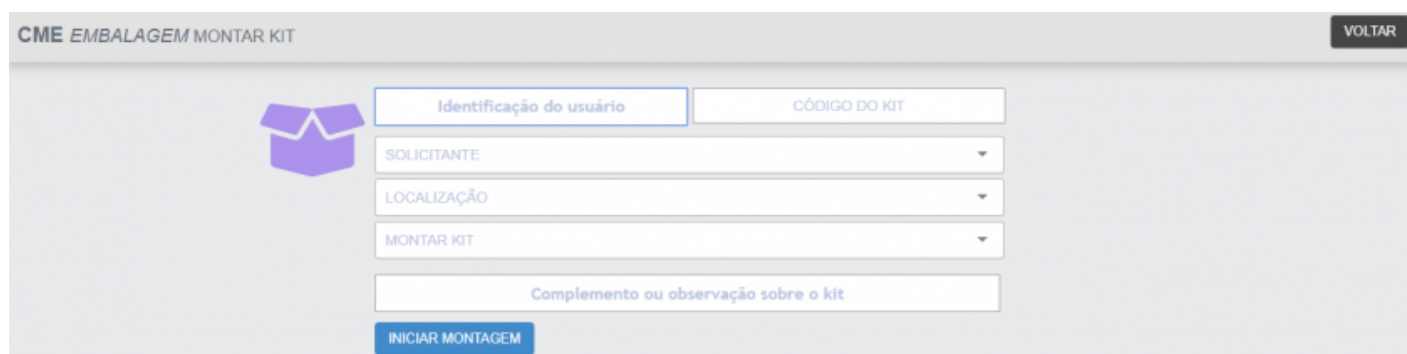

A interface de usuário para a funcionalidade "MONTAR KIT" na plataforma SISMETRO. No topo, há uma barra cinza com o texto "CME EMBALAGEM MONTAR KIT" à esquerda e um botão "VOLTAR" à direita. O formulário principal possui um ícone de caixa aberta à esquerda. À direita, há campos para "Identificação do usuário" e "CÓDIGO DO KIT". Abaixo, há três menus suspensos rotulados "SOLICITANTE", "LOCALIZAÇÃO" e "MONTAR KIT". Um campo de texto para "Complemento ou observação sobre o kit" está abaixo dos menus. No final, há um botão azul "INICIAR MONTAGEM".

### 2. INCLUIR ITENS NO LOTE

**Caminho no Menu:**

## CME-> Embalagem -> Listagem-> Editar / Itens do Kit

Ao iniciar a montagem de um Kit padrão, o sistema irá carregar a última versão dos itens liberada no cadastro do Kit.

2.1 Localize o patrimônio "OUTRO" requerido no Kit dentro do campo "Incluir item / Nome do item";

2.2 Selecione o invólucro da embalagem na barra de seleção logo abaixo da "Qualidade requerida dos itens";

2.3 Clique em "Fechar KIT" e identifique o código do crachá no campo "Identificação do usuário";

2.4 Clique em "Sim, quero fechar!".

CME EMBALAGEM ITENS DO KIT S#CK-898468 Versão 9.0

Voltar IMPRIMIR ETIQUETA Incluir Novo

**KIT CURATIVO #196**  
Versão: 9.0  
Validade: 180 dias

ELAINE ENEDINO DA SILVA 26/03/2020 08:32 criou o KIT  
ELAINE ENEDINO DA SILVA 26/03/2020 08:32 fechou o KIT

Qualidade requerida dos itens: **ÓTIMA**

SMS VAPOR

Quantidade abaixo do solicitado Quantidade ideal de itens Quantidade acima do solicitado Item não solicitado

Item	Tipo	Detranalix	Incluído	Requerido	Foto
OUTRO	4115		1	3	

Item	Tipo	Detranalix	ID	Requerido	Foto	Ação
OUTRO	4115	crachá: 168157	45746			

BUSCA


## 3. IMPRESSÃO DA ETIQUETA

### Caminho no Menu:

### CME -> Embalagem -> Listagem -> Etiqueta

Após a confirmação de fechamento do Kit, uma nova aba será aberta automaticamente com a etiqueta de embalagem do Kit:

OPA SIMPLES V: 10 - 1 item  
Validade: 22/09/2020  
S#CK-898518 Data: 26/03/2020 08:53  
Abr: LUZIA INALDA GOMES DOS S  
Fec: LUZIA INALDA GOMES DOS S  
SMS VAPOR



A VAPOR sismetra.com

IMPRIMIR

Para imprimir, basta clicar no botão "Imprimir" ou teclar "Enter". A etiqueta adesiva deverá ser colada sobre o invólucro do kit já embalado.

Obs: todos os kits produzidos estão disponível para edição (quando ainda aberto) e consulta no menu "Embalagem -> Listagem", a página também apresenta uma legenda de cores informando o status atual de cada kit.

☐ KIT Aberto ☐ Aguardando Processamento ☐ Aguardando Reprocessamento ☐ KIT Processado ☐ KIT Termodesinfestado ☐ KIT Excluído

Ativos Data início Data fim 50 Nº do KIT Patrimônio Código KIT Filial

Nome do KIT Solicitante/Proprietário

Localização Busca pelo colaborador Tipos especiais Filtrar

Status	Div	KIT	Criado	Processado	Código	Tipo Especial	Tipo / Criado por	Solicitante/Proprietário	Etiqueta	Lista	Reprocesso	Relatório	Ação
		SPCK-893646	19/03/2020 09:28		123		PEQUENAS CIRURGIAS MASTER CME 19/03/2020 09:28	CME ARSENAL					
		SPCK-853606	04/02/2020 09:28		123		PEQUENAS CIRURGIAS ALEX 04/02/2020 09:28	CME ARSENAL					
		SPCK-840139	20/01/2020 16:12				TESTE TERMO FERNANDO 20/01/2020 16:12	CME ARSENAL					

# Material Consignado

A plataforma permite o cadastro e

## MÓDULO

Gestão de Esterilização

## CADASTRO DE MATERIAL

### Caminho no Menu:

**Cadastro -> Patrimônio -> Listagem -> Adicionar**

1.1 Cadastrar o material desejado como "Patrimônio" dentro do Tipo de Tecnologia 'CONSIGNADO / CONTAINER';

1.2 Selecionar no campo "Solicitante" e "Localização" o cadastro que corresponde como fornecedor proprietário do material;

1.3 Selecionar no campo "Marca" e "Modelo" o cadastro que corresponde ao fabricante do instrumento;

1.4 Informar a "Av. de Qualidade" e "Composição" do material;

1.5 Salvar cadastro;

1.6 Na notificação seguinte, selecionar o campo "Complementar";

1.7 No final da tela, encontre o módulo "Aquisição/Baixa" e preencha os campos "Fornecedor"\* e "Tipo de aquisição", conforme os destaque a baixo:

**SISMETRO<sup>®</sup> Systems** SS CADASTRO CME ROUPARIA CQ ADM SAIR

CADASTRO PATRIMÔNIO 708658

LISTA DE PARADAS LISTA DE SS VOLTAR ABRIR SS SALVAR

PLANOS VINCULADOS ESPECIFICAÇÕES COMPONENTES CALIBRAÇÃO **AQUISIÇÃO / BAIXA** DOCUMENTOS BIBLIOTECA IoT PRODUÇÃO RASTREABILIDADE

**Aquisição**

Fornecedor: Danfe Nº. da nota: Valor Pago/de Mercado:

Tipo de aquisição: Parcela Inicial: Parcela Final: Data da Compra: Garantia até:

CONSIGNADO

**Baixa**

Tipo da Baixa: Data Baixa:

ATIVO

Mais detalhes da Baixa:

**B i**

1.8 Salve o cadastro.

\*Caso o fornecedor necessário não esteja cadastrado, consulte o passo a passo de cadastramento clicando [aqui](#).

Observações importantes:

- Cada caixa de material consignado que for dar entrada na CME deverá ser cadastrada como patrimônio com o tipo de aquisição "consignado" vinculado ao respectivo fornecedor. O cadastro será utilizado todas as vezes que o material retornar para a CME. Para facilitar o cadastramento recomenda-se solicitar aos fornecedores de materiais consignados a listagem de materiais disponíveis.
- Após efetuar o cadastramento o patrimônio deverá ser inativado. Somente cadastros inativados estarão disponíveis para dar entrada na CME. A ação de inativar é necessária para evitar que os materiais sejam alocados erroneamente em alguma fase do processamento.

## ENTRADA DE MATERIAL

**Caminho no Menu:**

**CME -> Consignado -> Listagem -> Adicionar Entrada**

2.1 Identifique o código do crachá no campo "Operador";

X

X

X

O usuário deverá registrar a entrada do material consignado e efetuar o vínculo da TAG temporária. A TAG tem por objetivo evitar que os materiais se misturem durante o procedimento de termodesinfecção.

Ao efetuar a entrada do material consignado a plataforma automaticamente efetua a ativação do cadastro do patrimônio para que o mesmo esteja disponível para processamento.

Com o auxílio do APP SISMETRO Capture o usuário deverá registrar a foto do material bem como dos dados do paciente de destino caso exista.

Após dar entrada do material a plataforma liberará a etiqueta de consignado. Esta etiqueta tem a mesma função que microetiqueta de DataMatrix. A etiqueta deverá ser fixada na tampa após a desinfecção. A etiqueta de papel está digitalmente vinculada a TAG plástica para garantir segurança nas próximas fases do processo.

## LIMPEZA

### **Caminho no Menu:**

#### **CME -> Limpeza**

A limpeza deverá ser registrada identificando a etiqueta impressa e não as TAG plástica.

Ao iniciar a embalagem de um KIT do tipo "CONSIGNADO PACIENTE" a plataforma liberará o campo TAG vinculada. Neste campo o usuário deverá identificar a TAG plástica que está acompanhando o caixa.

A plataforma exibirá as fotos associadas a TAG identificada e o usuário poderá confirmar se a caixa está montada corretamente, bem como verificar os dados do paciente. O usuário poderá alimentar os campos de paciente de destino (Esses dados são impressos na etiqueta).

Na sequência o usuário deverá identificar a etiqueta de papel que foi fixada na tampa. Por segurança a plataforma validará se a etiqueta de papel está devidamente vinculada a TAG plástica.

Após fechar o KIT a plataforma desvincula automaticamente a TAG e a mesma deverá ser enviada para o início do processo para ser novamente vinculada a outro material consignado.

Ao fechar o KIT a etiqueta estará disponível para impressão.

XX

X

X

Para registrar a saída do material o usuário deverá efetuar a contagem manual das peças e utilizar o APP SISMETRO Capture para inserir a foto do material no momento da conferência. Enquanto o material permanecer na instituição o cadastro do patrimônio permanecerá ativo e o mesmo estará ativo para processamento.

## INFORMAR SAÍDA/DEVOLUÇÃO

### Caminho no Menu:

#### CME -> Consignado -> Listagem

Acesse o caminho padrão e localiza a seta azul na coluna "Ação", conforme imagem a baixo:

**SISMETRO®** Systems

SS ▾ CADASTRO ▾ CME ▾ ROUPARIA ▾ CQ ▾ ADM ▾ ⚙ SAIR

**CME CONSIGNADOS LISTAGEM** 1 itens [ADICIONAR ENTRADA](#)

Ativos ▾ ID Decrescente ▾ Operador ▾

Solicitante, digite para buscar ▾

FILIAL ▾ Nº DA CAIXA Patrimônio vinculado 30 [Filtrar](#)

ID	Data Entrada	Data Saída	Identificação caixa	Qtde itens	Fornecedor	Operador Entrada / Saída	Nome / Título	Patrimônio vinculado / Solicitante / Localização	Relatório	Etiqueta	Ação
136	09/11/2022 14:23		1	1	FORNECEDOR - MATERIAL CONSIGNADO	ENFERMEIRA	1	CONSIGNADO / CONTAINER ID: 708519 CME - EQUIPE			

3.1 Informar o operador;

3.2 Preencher a quantidade devolvida;

3.3 Preencher uma observação;

3.4 Salvar e selecionar "Sim, quero salvar!"

## DÚVIDAS



Dúvida	Solução	Direito
Não consigo dar entrada do material.	Usuário sem direito. Solicite para o ADM adicionar o direito em seu usuário.	542

# Configurações de ciclos da CME

Configuração de ciclos de limpeza e esterilização na plataforma SISMETRO.

## MÓDULO

Gestão de Esterilização.

## CAMINHO PADRÃO

Menu CME -> Configurações da CME -> Ciclos







## INCLUIR CICLO

Após seguir o caminho padrão:

1. Clique em "Adicionar";
2. Identifique a Filial;
3. Selecione o Método de Esterilização/Desinfecção;
4. Selecione o Tipo de Ciclo;
5. Nomear o ciclo, exemplo: ciclo limpeza, esterilização, etc.
6. Informar a Temperatura;
7. Informar o Tempo de exposição, tempo total do ciclo e a pressão utilizada.
8. Clique em "Salvar" no canto superior direito da tela.

## VINCULAR CICLO AO PATRIMÔNIO

Na tela de Listagem de Ciclos:

Ciclo	Nome	Método	Temperatura	Tempo Exposição	Pressão	Tempo Total	Permitidos	Ação
TESTE BOWIE & DICK	BOWIE DICK	A VAPOR	134	4	2.2		3	 
CICLO NORMAL	TECIDOS	A VAPOR	134	5	2.2		3	 
CICLO NORMAL	INSTRUMENTAL	A VAPOR	134	5	2.2		3	 

1. Localize o ciclo a ser vinculado a um patrimônio;
2. Clique no ícone de lápis azul no campo "Permitidos";
3. Em "Buscar Patrimônio" localize o equipamento a ser utilizado no ciclo;
4. Pressione "OK" para vincular o ciclo ao patrimônio.

Obs.: Assim como em demais etapas do processo, o equipamento a ser vinculado precisa possuir especificação compatível com a atividade a ser destinada a ele.

## DÚVIDA

Dúvida	Solução
Na tela de vínculos, ao tentar vincular o ciclo a um patrimônio o sistema apresenta a mensagem "1053PATRIMÔNIO NÃO PERTENCE A FILIAL DO CICLO! - 0".	Assim como em demais etapas do processo, o equipamento a ser vinculado precisa possuir especificação compatível com a atividade a ser destinada a ele.

# Configuração de Kit Padrão não rastreável

Criação e configuração de KIT Padrão não rastreável na plataforma SISMETRO.

## MÓDULO

Gestão de Esterilização.

## CADASTRO DO MATERIAL CIRÚRGICO

CADASTRO PATRIMÔNIO INCLUIR
VOLTAR
SALVAR

Tipo de Tecnologia

Digite para buscar, ex: MONITOR, AUTOCLAVE, etc

Categoria

Observação / Descrição:

Situação:

GUT - Gravidade

SEM GRAVIDADE

Solicitante:

Localização

Filho de ?

Marca:

+

Modelo:

+

Número de série:

Nosso N°. de patrimônio:

TAG patrimônio

Data Matrix / EAN / RFID

RFID Connect

TAG de função

ID ERP:

Av. de Qualidade:

Composição

Máx. de Esterilizações

Rastreável

SIM

Número do registro na Anvisa

Técnico designado:

Centro de custo

Coordenadas Google Maps

Ex: -23.566481, -46.649535

Adicionar localização

Operador/Contato:

Acessórios/Cabos/Detalhes:

B

/

## Caminho no Menu:

### Cadastro -> Patrimônio -> Listagem -> Adicionar

- 1.1 Cadastrar o material como Patrimônio no Tipo de Tecnologia correspondente ao instrumento;
- 1.2 Selecionar no campo "Solicitante" e "Localização" o cadastro que corresponde como proprietário do material;
- 1.3 Selecionar no campo "Marca" e "Modelo" o cadastro que corresponde ao fabricante do material;
- 1.4 Informar a "Av. de Qualidade" e "Composição" do material;
- 1.5 Selecionar "NÃO" no campo "Rastreável";

1.6 Se necessário, configurar o número máximo de esterilizações do material no campo "Máx. de Esterilizações";

1.7 Salvar cadastro.

## CONFIGURAÇÃO DO KIT PADRÃO

**CME KIT PADRÃO** Incluir VOLTAR Salvar

Código

Tipo do KIT

Realizar Check final em sala!

SEM RASTREABILIDADE

NÃO

Primeiro Invólucro

Validade dias

Tabela de Valor

EMBALAGEM

30

Segundo Invólucro

Validade dias

Tabela de Valor

Terceiro Invólucro

Validade dias

Tabela de Valor

Quarto Invólucro

Validade dias

Tabela de Valor

Embalado pela

Armazenado em

Solicitante, digite para buscar

Localização

Localização

Medidas em milímetros

Largura

Altura

Profundidade

Litros

=

Esterilização:

Qualidade dos itens:

Kit's prontos no Arsenal

NÃO

MINIMO

MAXIMO

Permite divergência

Alerta de não pertence ao kit

NÃO PERMITE ITENS ADICIONAIS

EXIBIR ALERTA

Impressão da etiqueta

IMPRESSÃO COMPLETA DA ETIQUETA

**Caminho no Menu:**




## CME -> Kit Padrão -> Adicionar

- 2.1 Cadastrar a caixa como Kit Padrão de acordo com seus respectivos dados;
- 2.2 No campo "Tipo do KIT" selecionar "SEM RASTREABILIDADE";
- 2.3 No campo "Permite divergência" selecionar a opção "Não permite itens adicionais";
- 2.4 No campo "Alerta de não pertence ao kit" selecionar a opção "Exibir alerta";
- 2.5 Salvar cadastro.

Versão do Kit	Versão dos itens
Corresponde ao cadastro e configurações do Kit padrão	Corresponde aos materiais que compõem o Kit padrão

Para editar a "Versão do Kit", acesse a última versão disponível na janela de seleção.

Para editar a "Versão dos itens", acesse a última versão disponível na janela de seleção ou a opção "Montar Versão"

Foto	ID	Código	Versão do Kit	Dados do KIT Padrão	Solicitante / Proprietário	Ciclo e validade	Check final	Versão dos itens	Status
	7791		<div>▼ Atual 2</div>	CAIXA PC LARANJA/MARRON/AMARELA EQUIPE DO CME Volume Litros: 33.6	HOSPITAL SAO LUCAS SA	SMS AUTOCLAVE Val: 60 dias		<div>▼ MONTAR VERSÃO</div>	 

## CONFIGURAÇÃO DOS ITENS DO KIT

### Caminho no Menu:

## CME -> Kit Padrão -> Versão dos itens do Kit -> Selecionar ou montar versão

- 3.1 Certifique-se que o Kit está editável exibindo o botão "Liberar Versão";
- 3.2 Utilize o campo "Nome do material" para identificar o instrumental;
- 3.3 Após identificar todos os materiais pertencentes ao Kit clique em "Liberar Versão" para que o Kit seja exibido na montagem da embalagem.

Nome do KIT:  
KIT SUTURA

Validade em DIAS: 60

Local de embalagem: EQUIPE DO CME

Tipo do KIT: NÃO RASTREÁVEL

10

Total de itens

Rastreabilidade

.0

Versão dos itens

Testar

Liberar Versão

EDITANDO VERSÃO DOS ITENS DO KIT

Incluir material







Quando inserido um item pelo datamatrix ele será exclusivo deste kit padrão!

Nome do material

Quantidade

OK

Manu(item em manutenção) Temp(item temporário no KIT)

Item	Manu	Temp	Foto	Nome	Tipo	Datamatrix / RFID	Qtde	Ação
236560				COTONETE	3696		4	 
236561				PINÇA KELLY CURVA	3225		6	 

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Como editar um kit?	Cada edição contabiliza em uma nova versão do kit, ou seja, um momento kit não será editado, e sim elaborada uma nova versão do mesmo.	-
Não visualizo o campo para tornar o patrimônio não rastreável.	Usuário sem direitos. Procure o ADM (administrador) da unidade para liberar o direito "DEFINIR PATRIMONIO COMO NAO RASTREAVEL *CME".	667



# Configurações básicas para Operador CME

Consulte este documento para compreender como configurar o crachá de um usuário Operador CME a partir de um usuário de Gerência CME.

## MÓDULO

Gestão de Esterilização.


## CAMINHO PADRÃO

Menu Cadastro -> Usuário

## CONFIGURAÇÃO

A partir da listagem de usuários:

1. Localize o operador que deseja realizar o cadastro do crachá;
2. No campo "crachá", faça a identificação via leitor de código de barras ou informando o número do código do crachá do colaborador.
3. Na mesma tela realize a liberação do direito: "220 - ARSENAL CANCELAR INFORMACAO DE USO DE KIT";
4. Clique em salvar.

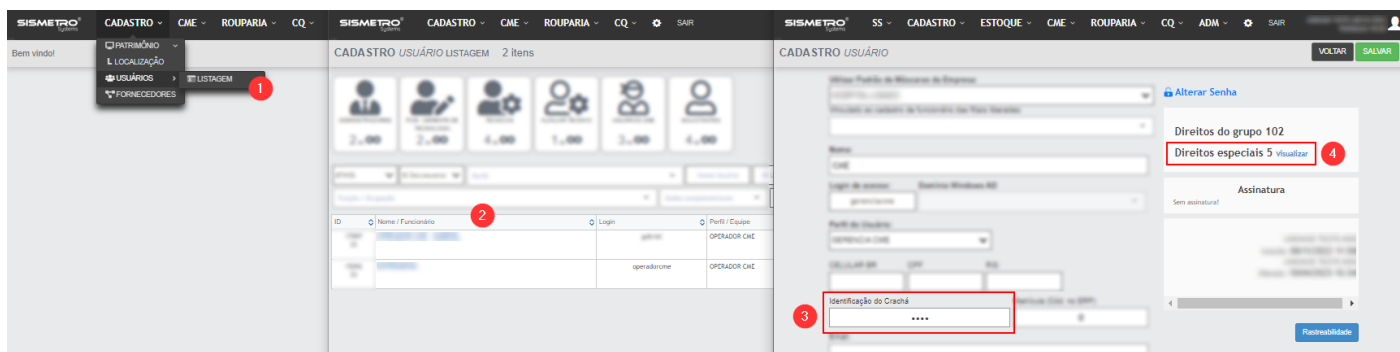

*Clique para ampliar*

## DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Não consigo realizar o cadastro de usuários.	Usuário sem direitos. Solicite ao administrador da sua unidade para que faça a liberação do direito especial "CADASTRAR USUARIO".	17
Como faço para liberar direitos especiais aos usuários?	Caso tenha dúvidas sobre este tópico clique <a href="#">aqui</a> para saber mais.	-