

Configurações da CME

Material desenvolvido durante visita técnica na empresa Multilav Esterilizações

- Configuração de Kit Padrão travado por Data Matrix
- Cadastro de Patrimônio - Tipo de Tecnologia "Outro"
- Embalagem de Tecidos
- Material Consignado
- Configurações de ciclos da CME
- Configuração de Kit Padrão não rastreável
- Configurações básicas para Operador CME

Configuração de Kit Padrão travado por Data Matrix

Criação e configuração de KIT Padrão com instrumental travado por Data Matrix na plataforma SISMETRO.

MÓDULO

Gestão de Esterilização.

PASSO A PASSO

Tipo de Tecnologia

PINÇA BACKHAUS 13CM

Categoria

MATERIAL CIRURGICO

Observação:

GUT - Gravidade

SEM GRAVIDADE

Filial

MULTILAV - UNIDADE RIBEIRAO PRETO

Solicitante: ?

MOVIMENTAÇÃO

HOSPITAL SAO LUCAS SA 18701

Localização

Filho de ?

Marca:

AD INSTRUMENTOS

ADD

Modelo:

-SEM MODELO-

ADD

Número de Série:

Nosso N° de Patrimônio:

TAG

Data Matrix / EAN

ML003853

TAG de Função

Av. de Qualidade:

BOA

Composição

METAL

Máx. de Esterilizações

1. CADASTRO DO MATERIAL CIRÚRGICO

Caminho no Menu:

Cadastro -> Patrimônio -> Listagem

- 1.1 Cadastrar o material como Patrimônio no Tipo de Tecnologia correspondente ao instrumento;
- 1.2 Selecionar no campo "Solicitante" e "Localização" o cadastro que corresponde como proprietário do material;
- 1.3 Selecionar no campo "Marca" e "Modelo" o cadastro que corresponde ao fabricante do material;
- 1.4 Identificar o adesivo *Data Matrix* do instrumental dentro do cadastro do Patrimônio no campo "Data Matrix / EAN";

1.5 Informar a "Av. de Qualidade" e "Composição" do material;

1.6 Se necessário, configurar o número máximo de esterilizações do material no campo "Máx. de Esterilizações";

1.7 Salvar cadastro.

CME KIT PADRÃO Editando 7791 VOLTAR Salvar versão

Nome do KIT
CAIXA PC LARANJA/MARRON/AMARELA

Solicitante/Proprietário
HOSPITAL SAO LUCAS SA

Localização

Código KIT's especiais Realizar Check final em sala!
NÃO

Primeiro Invólucro Validade em dias
SMS AUTOCLAVE 60

Segundo Invólucro Validade em dias

Terceiro Invólucro Validade em dias

Quarto Invólucro Validade em dias

Embalado pela
EQUIPE DO CME

Armazenado em
MULTILAV ESTERILIZACOES

ARSENAL

Medidas em milímetros
Largura Altura Profundidade Litros
300 700 160 = 33.6

Esterilização: Qualidade dos itens: Kit's prontos no Arsenal
É obrigatória BOA 1 1

Permite divergência Alerta de não pertence ao kit
NÃO PERMITE ITENS ADICIONAIS EXIBIR ALERTA

Impressão da etiqueta
IMPRESSÃO COMPLETA DA ETIQUETA

2.
Versão do KIT
RODRIGO ADAO DE SANTIS
Incluiu: 24/02/2020 12:13
Alterou: 24/02/2020 12:35

Sem Foto Destaque [Gerenciar Fotos](#)

Vincular POP
Solicitante: MULTILAV ESTERILIZACOES
Categoria
POP

☒

[Rastreabilidade](#)

2. CONFIGURAÇÃO DO KIT PADRÃO

Caminho no Menu:

CME -> Kit Padrão -> Adicionar

2.1 Cadastrar a caixa como Kit Padrão de acordo com seus respectivos dados;

2.2 Identificar a micro etiqueta *Data Matrix* do *container* dentro do campo "Código";

2.3 No campo "Permite divergência" selecionar a opção "Não permite itens adicionais";



2.4 No campo "Alerta de não pertence ao kit" selecionar a opção "Exibir alerta";

2.5 Salvar cadastro.

| Versão do Kit | Versão dos itens |
|---|--|
| Corresponde ao cadastro e configurações do Kit padrão | Corresponde aos materiais que compõem o Kit padrão |

Para editar a "Versão do Kit", acesse a última versão disponível na janela de seleção.

Para editar a "Versão dos itens", acesse a última versão disponível na janela de seleção ou a opção "Montar Versão"

| Foto | ID | Código | Versão do Kit | Dados do KIT Padrão | Solicitante / Proprietário | Ciclo e validade | Check final | Versão dos itens | Status |
|-------------------|------|--------|---------------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|--|
| Sem Foto Destaque | 7791 | | Atual 2 | CAIXA PC LARANJA/MARRON/AMARELA EQUIPE DO CME Volume Litros: 33.6 | HOSPITAL SAO LUCAS SA | SMS AUTOCLAVE Val: 60 dias | | |   MONTAR VERSÃO |

3. CONFIGURAÇÃO DOS ITENS DO KIT

Caminho no Menu:

CME -> Kit Padrão -> Versão dos itens do Kit -> Selecionar ou montar versão

3.1 Certifique-se que o Kit está editável exibindo o botão "Liberar Versão";

3.2 Utilize o campo "*Data Matrix*" para identificar o código da micro etiqueta do instrumental;

3.3 Após identificar todos os materiais pertencentes ao Kit clique em "Liberar Versão" para que o Kit seja exibido na montagem da embalagem.

Nome do KIT:

CAIXA PC LARANJA/MARRON/AMARELA

Validade em DIAS: Local de embalagem:

60

EQUIPE DO CME

2

Total de itens

Rastreabilidade

.0

Versão dos itens

Liberar Versão

EDITANDO VERSÃO DOS ITENS DO KIT

Incluir material

Nome do material

Quantidade







ou

Datamatrix

OK

Quando inserido um item pelo datamatrix ele será exclusivo deste kit padrão!

Manu(item em manutenção) Temp(item temporário no KIT)

| Item | Manu | Temp | Nome | Tipo | Datamatrix | Qtde | Ação |
|--------|---|---|------------------------------------|------|------------|------|---|
| 147638 |  |  | PINCA KOCHER RETA 14 CM ID: 315593 | 355 | ML003057 | |  |
| 147636 |  |  | PINCA KOCHER RETA 14 CM ID: 166684 | 355 | ML005281 | |  |

DÚVIDAS

Dúvida

Como editar um kit?

Solução

Cada edição contabiliza em uma nova versão do kit, ou seja, um momento kit não será editado, e sim elaborada uma nova versão do mesmo.

Cadastro de Patrimônio - Tipo de Tecnologia "Outro"

Cadastro de instrumental cirúrgico na plataforma SISMETRO.

MÓDULO

Gestão Inteligente de Esterilização.

PASSO A PASSO

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Tipo de Tecnologia | | |
| OUTRO ▼ | | |
| Categoria | | |
| MATERIAL CIRURGICO ▼ | | |
| Observação: | | |
| | | |
| GUT - Gravidade | | |
| SEM GRAVIDADE ▼ | | |
| Filial | | |
| ESTERILIZA GOIANIA | | |
| Solicitante: ? | | MOVIMENTAÇÃO |
| CME #134201 | | |
| Localização | | |
| ARSENAL #9083 | | |
| Filho de ? | | |
| | | |
| Marca: | | |
| -MARCA DESCONHECIDA- ▼ | | ADD |
| Modelo: | | |
| -SEM MODELO- ▼ | | ADD |
| Número de Série: | | |
| | | |
| Nosso N°. de Patrimônio: | TAG | |
| | | |
| Data Matrix / EAN | TAG de Função | |
| | ▼ | |
| Av. de Qualidade: | Composição | Máx. de Esterilizações |
| ÓTIMA ▼ | OUTRO ▼ | |

1. CADASTRO DO MATERIAL CIRÚRGICO

Caminho no Menu:

Cadastro -> Patrimônio -> Listagem

1.1 Cadastrar o material desejado como "Patrimônio" dentro do Tipo de Tecnologia correspondente ao instrumento;

1.2 Selecionar no campo "Solicitante" e "Localização" o cadastro que corresponde como proprietário do material;

1.3 Selecionar no campo "Marca" e "Modelo" o cadastro que corresponde ao fabricante do instrumento;

1.4 Informar a "Av. de Qualidade" e "Composição" do material;

1.5 Salvar cadastro.

Embalagem de Tecidos

Criação e execução do procedimento de embalagem para tecidos na plataforma SISMETRO.

MÓDULO

Gestão Inteligente de Esterilização.


PASSO A PASSO

1. MONTAR KIT


Caminho no Menu:

CME-> Embalagem-> Montar Kit

- 1.1 Identifique o código do crachá no campo "Identificação do usuário";
- 1.2 Identifique o código da caixa / container no campo "Código do Kit" ou busque o Kit identificando os campos "Solicitante / Localização";
- 1.3 No campo "Montar Kit" deve ser selecionado o Kit padrão que será embalado;
- 1.4 Se necessário utilize o campo "Complemento ou observação sobre o kit";
- 1.5 Clique no botão "Iniciar Montagem".

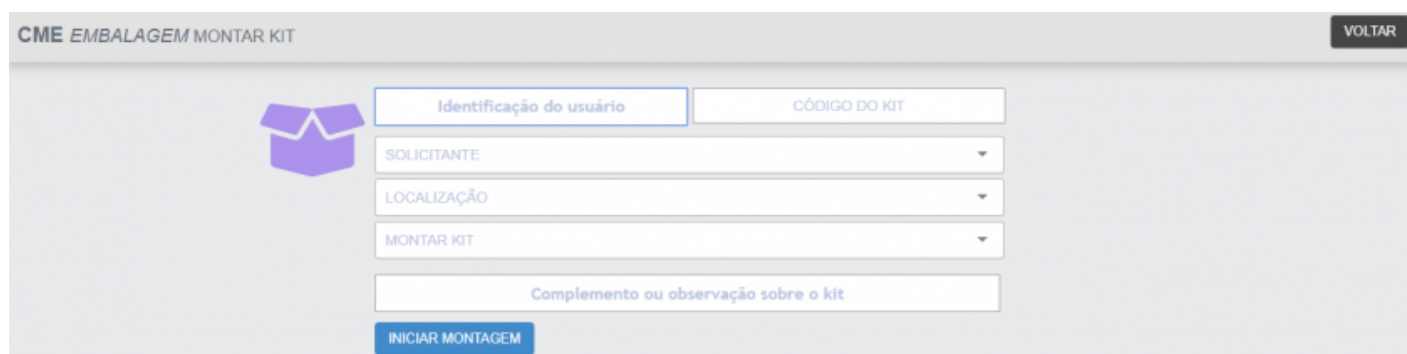

CME EMBALAGEM MONTAR KIT VOLTAR



Identificação do usuário CÓDIGO DO KIT

SOLICITANTE

LOCALIZAÇÃO

MONTAR KIT

Complemento ou observação sobre o kit

INICIAR MONTAGEM

2. INCLUIR ITENS NO LOTE

Caminho no Menu:

CME-> Embalagem -> Listagem-> Editar / Itens do Kit

Ao iniciar a montagem de um Kit padrão, o sistema irá carregar a última versão dos itens liberada no cadastro do Kit.

2.1 Localize o patrimônio "OUTRO" requerido no Kit dentro do campo "Incluir item / Nome do item";

2.2 Selecione o invólucro da embalagem na barra de seleção logo abaixo da "Qualidade requerida dos itens";

2.3 Clique em "Fechar KIT" e identifique o código do crachá no campo "Identificação do usuário";

2.4 Clique em "Sim, quero fechar!".

| Item | Tipo | Detranalix | Incluído | Requerido | Foto |
|-------|------|------------|----------|-----------|------|
| OUTRO | | 4115 | 1 | 3 | |

| Item | Tipo | Detranalix | ID | Requerido | Foto | Ação |
|-------|------|------------|--------|-----------|------|------|
| OUTRO | | 4115 | 188157 | 45746 | | |


3. IMPRESSÃO DA ETIQUETA

Caminho no Menu:

CME -> Embalagem -> Listagem -> Etiqueta

Após a confirmação de fechamento do Kit, uma nova aba será aberta automaticamente com a etiqueta de embalagem do Kit:

OPA SIMPLES V: 10 - 1 item
Validade: 22/09/2020
S#CK-898518 Data: 26/03/2020 08:53
Abr: LUZIA INALDA GOMES DOS S
Fec: LUZIA INALDA GOMES DOS S
SMS VAPOR



A VAPOR sismetra.com

IMPRIMIR

Para imprimir, basta clicar no botão "Imprimir" ou teclar "Enter". A etiqueta adesiva deverá ser colada sobre o invólucro do kit já embalado.

Obs: todos os kits produzidos estão disponível para edição (quando ainda aberto) e consulta no menu "Embalagem -> Listagem", a página também apresenta uma legenda de cores informando o status atual de cada kit.

☐ KIT Aberto ☐ Aguardando Processamento ☐ Aguardando Reprocessamento ☐ KIT Processado ☐ KIT Termodesinfestado ☐ KIT Excluído

Ativos Data início Data fim 50 Nº do KIT Patrimônio Código KIT Filial

Nome do KIT Solicitante/Proprietário

Localização Busca pelo colaborador Tipos especiais Filtrar

| Status | Div | KIT | Criado | Processado | Código | Tipo Especial | Tipo / Criado por | Solicitante/Proprietário | Etiqueta | Lista | Reprocesso | Relatório | Ação |
|--------|-----|-------------|------------------|------------|--------|---------------|---|--------------------------|----------|-------|------------|-----------|------|
| | | SPCK-893646 | 19/03/2020 09:28 | | 123 | | PEQUENAS CIRURGIAS MASTER CME 19/03/2020 09:28 | CME ARSENAL | | | | | |
| | | SPCK-853606 | 04/02/2020 09:28 | | 123 | | PEQUENAS CIRURGIAS ALEX 04/02/2020 09:28 | CME ARSENAL | | | | | |
| | | SPCK-840139 | 20/01/2020 16:12 | | | | TESTE TERMO FERNANDO 20/01/2020 16:12 | CME ARSENAL | | | | | |

Material Consignado

A plataforma permite o cadastro e

MÓDULO

Gestão de Esterilização

CADASTRO DE MATERIAL

Caminho no Menu:

Cadastro -> Patrimônio -> Listagem -> Adicionar

1.1 Cadastrar o material desejado como "Patrimônio" dentro do Tipo de Tecnologia 'CONSIGNADO / CONTAINER';

1.2 Selecionar no campo "Solicitante" e "Localização" o cadastro que corresponde como fornecedor proprietário do material;

1.3 Selecionar no campo "Marca" e "Modelo" o cadastro que corresponde ao fabricante do instrumento;

1.4 Informar a "Av. de Qualidade" e "Composição" do material;

1.5 Salvar cadastro;

1.6 Na notificação seguinte, selecionar o campo "Complementar";

1.7 No final da tela, encontre o módulo "Aquisição/Baixa" e preencha os campos "Fornecedor"* e "Tipo de aquisição", conforme os destaque a baixo:

SISMETRO[®] Systems SS CADASTRO CME ROUPARIA CQ ADM SAIR

CADASTRO PATRIMÔNIO 708658

LISTA DE PARADAS LISTA DE SS VOLTAR ABRIR SS SALVAR

PLANOS VINCULADOS ESPECIFICAÇÕES COMPONENTES CALIBRAÇÃO **AQUISIÇÃO / BAIXA** DOCUMENTOS BIBLIOTECA IoT PRODUÇÃO RASTREABILIDADE

Aquisição

Fornecedor: Danfe Nº. da nota: Valor Pago/de Mercado:

Tipo de aquisição: Parcela Inicial: Parcela Final: Data da Compra: Garantia até:

CONSIGNADO

Baixa

Tipo da Baixa: Data Baixa:

ATIVO

Mais detalhes da Baixa:

B i

1.8 Salve o cadastro.

*Caso o fornecedor necessário não esteja cadastrado, consulte o passo a passo de cadastramento clicando [aqui](#).

Observações importantes:

- Cada caixa de material consignado que for dar entrada na CME deverá ser cadastrada como patrimônio com o tipo de aquisição "consignado" vinculado ao respectivo fornecedor. O cadastro será utilizado todas as vezes que o material retornar para a CME. Para facilitar o cadastramento recomenda-se solicitar aos fornecedores de materiais consignados a listagem de materiais disponíveis.
- Após efetuar o cadastramento o patrimônio deverá ser inativado. Somente cadastros inativados estarão disponíveis para dar entrada na CME. A ação de inativar é necessária para evitar que os materiais sejam alocados erroneamente em alguma fase do processamento.

ENTRADA DE MATERIAL

Caminho no Menu:

CME -> Consignado -> Listagem -> Adicionar Entrada

2.1 Identifique o código do crachá no campo "Operador";

X

X

X

O usuário deverá registrar a entrada do material consignado e efetuar o vínculo da TAG temporária. A TAG tem por objetivo evitar que os materiais se misturem durante o procedimento de termodesinfecção.

Ao efetuar a entrada do material consignado a plataforma automaticamente efetua a ativação do cadastro do patrimônio para que o mesmo esteja disponível para processamento.

Com o auxílio do APP SISMETRO Capture o usuário deverá registrar a foto do material bem como dos dados do paciente de destino caso exista.

Após dar entrada do material a plataforma liberará a etiqueta de consignado. Esta etiqueta tem a mesma função que microetiqueta de DataMatrix. A etiqueta deverá ser fixada na tampa após a desinfecção. A etiqueta de papel está digitalmente vinculada a TAG plástica para garantir segurança nas próximas fases do processo.

LIMPEZA

Caminho no Menu:

CME -> Limpeza

A limpeza deverá ser registrada identificando a etiqueta impressa e não as TAG plástica.

Ao iniciar a embalagem de um KIT do tipo "CONSIGNADO PACIENTE" a plataforma liberará o campo TAG vinculada. Neste campo o usuário deverá identificar a TAG plástica que está acompanhando o caixa.

A plataforma exibirá as fotos associadas a TAG identificada e o usuário poderá confirmar se a caixa está montada corretamente, bem como verificar os dados do paciente. O usuário poderá alimentar os campos de paciente de destino (Esses dados são impressos na etiqueta).

Na sequência o usuário deverá identificar a etiqueta de papel que foi fixada na tampa. Por segurança a plataforma validará se a etiqueta de papel está devidamente vinculada a TAG plástica.

Após fechar o KIT a plataforma desvincula automaticamente a TAG e a mesma deverá ser enviada para o início do processo para ser novamente vinculada a outro material consignado.

Ao fechar o KIT a etiqueta estará disponível para impressão.

XX

X

X


Para registrar a saída do material o usuário deverá efetuar a contagem manual das peças e utilizar o APP SISMETRO Capture para inserir a foto do material no momento da conferência. Enquanto o material permanecer na instituição o cadastro do patrimônio permanecerá ativo e o mesmo estará ativo para processamento.



INFORMAR SAÍDA/DEVOLUÇÃO

Caminho no Menu:

CME -> Consignado -> Listagem

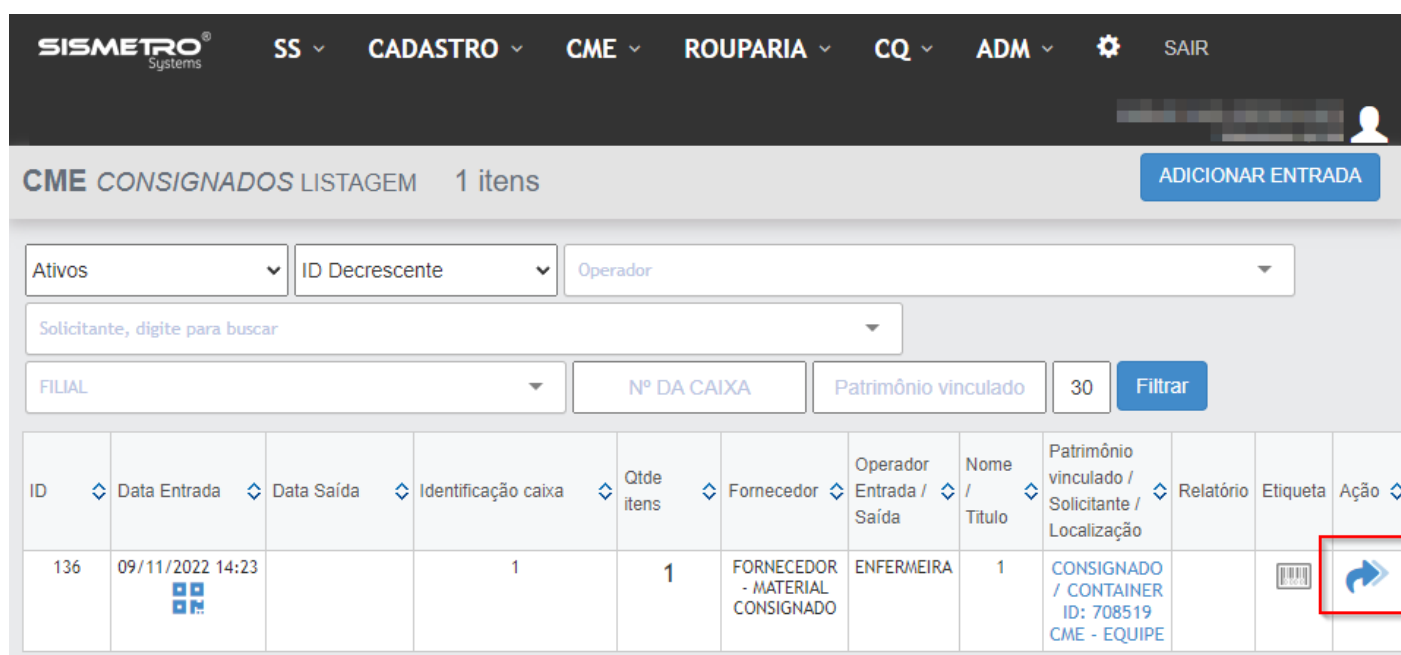Acesse o caminho padrão e localiza a seta azul na coluna "Ação", conforme imagem a baixo:



| ID | Data Entrada | Data Saída | Identificação caixa | Qtde itens | Fornecedor | Operador Entrada / Saída | Nome / Título | Patrimônio vinculado / Solicitante / Localização | Relatório | Etiqueta | Ação |
|-----|------------------|------------|---------------------|------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|--|-----------|---|---|
| 136 | 09/11/2022 14:23 | | 1 | 1 | FORNECEDOR - MATERIAL CONSIGNADO | ENFERMEIRA | 1 | CONSIGNADO / CONTAINER ID: 708519 CME - EQUIPE | |  |  |

3.1 Informar o operador;

3.2 Preencher a quantidade devolvida;

3.3 Preencher uma observação;

3.4 Salvar e selecionar "Sim, quero salvar!"

DÚVIDAS

| Dúvida | Solução | Direito |
|--------------------------------------|--|---------|
| Não consigo dar entrada do material. | Usuário sem direito. Solicite para o ADM adicionar o direito em seu usuário. | 542 |
| | | |
| | | |

Configurações de ciclos da CME

Configuração de ciclos de limpeza e esterilização na plataforma SISMETRO.

MÓDULO

Gestão de Esterilização.

CAMINHO PADRÃO

Menu CME -> Configurações da CME -> Ciclos







INCLUIR CICLO

Após seguir o caminho padrão:

- 1. Clique em "Adicionar";
- 2. Identifique a Filial;
- 3. Selecione o Método de Esterilização/Desinfecção;
- 4. Selecione o Tipo de Ciclo;
- 5. Nomear o ciclo, exemplo: ciclo limpeza, esterilização, etc.
- 6. Informar a Temperatura;
- 7. Informar o Tempo de exposição, tempo total do ciclo e a pressão utilizada.
- 8. Clique em "Salvar" no canto superior direito da tela.

VINCULAR CICLO AO PATRIMÔNIO

Na tela de Listagem de Ciclos:

| Ciclo | Nome | Método | Temperatura | Tempo Exposição | Pressão | Tempo Total | Permitidos | Ação |
|--------------------|--------------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|------------|---|
| TESTE BOWIE & DICK | BOWIE DICK | A VAPOR | 134 | 4 | 2.2 | | 3 |   |
| CICLO NORMAL | TECIDOS | A VAPOR | 134 | 5 | 2.2 | | 3 |   |
| CICLO NORMAL | INSTRUMENTAL | A VAPOR | 134 | 5 | 2.2 | | 3 |   |

1. Localize o ciclo a ser vinculado a um patrimônio;
2. Clique no ícone de lápis azul no campo "Permitidos";
3. Em "Buscar Patrimônio" localize o equipamento a ser utilizado no ciclo;
4. Pressione "OK" para vincular o ciclo ao patrimônio.

Obs.: Assim como em demais etapas do processo, o equipamento a ser vinculado precisa possuir especificação compatível com a atividade a ser destinada a ele.

DÚVIDA

| Dúvida | Solução |
|--|--|
| Na tela de vínculos, ao tentar vincular o ciclo a um patrimônio o sistema apresenta a mensagem "1053PATRIMÔNIO NÃO PERTENCE A FILIAL DO CICLO! - 0". | Assim como em demais etapas do processo, o equipamento a ser vinculado precisa possuir especificação compatível com a atividade a ser destinada a ele. |

Configuração de Kit Padrão não rastreável

Criação e configuração de KIT Padrão não rastreável na plataforma SISMETRO.

MÓDULO

Gestão de Esterilização.

CADASTRO DO MATERIAL CIRÚRGICO

CADASTRO PATRIMÔNIO INCLUIR
VOLTAR
SALVAR

Tipo de Tecnologia

Digite para buscar, ex: MONITOR, AUTOCLAVE, etc

Categoria

Observação / Descrição:

Situação:

GUT - Gravidade

SEM GRAVIDADE

Solicitante:

Localização

Filho de ?

Marca:

Modelo:

Número de série:

Nosso N°. de patrimônio:

TAG patrimônio

Data Matrix / EAN / RFID

RFID Connect

TAG de função

ID ERP:

Av. de Qualidade:

Composição

Máx. de Esterilizações

Rastreável

SIM

Número do registro na Anvisa

Técnico designado:

Centro de custo

Coordenadas Google Maps

Ex: -23.566481, -46.649535

Adicionar localização

Operador/Contato:

Acessórios/Cabos/Detalhes:

Caminho no Menu:

Cadastro -> Patrimônio -> Listagem -> Adicionar

- 1.1 Cadastrar o material como Patrimônio no Tipo de Tecnologia correspondente ao instrumento;
- 1.2 Selecionar no campo "Solicitante" e "Localização" o cadastro que corresponde como proprietário do material;
- 1.3 Selecionar no campo "Marca" e "Modelo" o cadastro que corresponde ao fabricante do material;
- 1.4 Informar a "Av. de Qualidade" e "Composição" do material;
- 1.5 Selecionar "NÃO" no campo "Rastreável";

1.6 Se necessário, configurar o número máximo de esterilizações do material no campo "Máx. de Esterilizações";

1.7 Salvar cadastro.

CONFIGURAÇÃO DO KIT PADRÃO

CME KIT PADRÃO Incluir VOLTAR Salvar

Código

Tipo do KIT

Realizar Check final em sala!

SEM RASTREABILIDADE

NÃO

Primeiro Invólucro

Validade dias

Tabela de Valor

EMBALAGEM

30

Segundo Invólucro

Validade dias

Tabela de Valor

Terceiro Invólucro

Validade dias

Tabela de Valor

Quarto Invólucro

Validade dias

Tabela de Valor

Embalado pela

Armazenado em

Solicitante, digite para buscar

Localização

Localização

Medidas em milímetros

Largura

Altura

Profundidade

Litros

=

Esterilização:

Qualidade dos itens:

Kit's prontos no Arsenal

NÃO

MINIMO

MAXIMO

Permite divergência

Alerta de não pertence ao kit

NÃO PERMITE ITENS ADICIONAIS

EXIBIR ALERTA

Impressão da etiqueta

IMPRESSÃO COMPLETA DA ETIQUETA

Caminho no Menu:




CME -> Kit Padrão -> Adicionar

- 2.1 Cadastrar a caixa como Kit Padrão de acordo com seus respectivos dados;
- 2.2 No campo "Tipo do KIT" selecionar "SEM RASTREABILIDADE";
- 2.3 No campo "Permite divergência" selecionar a opção "Não permite itens adicionais";
- 2.4 No campo "Alerta de não pertence ao kit" selecionar a opção "Exibir alerta";
- 2.5 Salvar cadastro.

| Versão do Kit | Versão dos itens |
|---|--|
| Corresponde ao cadastro e configurações do Kit padrão | Corresponde aos materiais que compõem o Kit padrão |

Para editar a "Versão do Kit", acesse a última versão disponível na janela de seleção.

Para editar a "Versão dos itens", acesse a última versão disponível na janela de seleção ou a opção "Montar Versão"

| Foto | ID | Código | Versão do Kit | Dados do KIT Padrão | Solicitante / Proprietário | Ciclo e validade | Check final | Versão dos itens | Status |
|--|------|--------|--------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|---|
|  | 7791 | | <div>▼ Atual 2</div> | CAIXA PC LARANJA/MARRON/AMARELA EQUIPE DO CME Volume Litros: 33.6 | HOSPITAL SAO LUCAS SA | SMS AUTOCLAVE Val: 60 dias | | <div>▼ MONTAR VERSÃO</div> |   |

CONFIGURAÇÃO DOS ITENS DO KIT

Caminho no Menu:

CME -> Kit Padrão -> Versão dos itens do Kit -> Selecionar ou montar versão

- 3.1 Certifique-se que o Kit está editável exibindo o botão "Liberar Versão";
- 3.2 Utilize o campo "Nome do material" para identificar o instrumental;
- 3.3 Após identificar todos os materiais pertencentes ao Kit clique em "Liberar Versão" para que o Kit seja exibido na montagem da embalagem.

Nome do KIT:
KIT SUTURA

Validade em DIAS: 60

Local de embalagem: EQUIPE DO CME

Tipo do KIT: NÃO RASTREÁVEL

10

Total de itens

Rastreabilidade

.0

Versão dos itens

Testar

Liberar Versão

EDITANDO VERSÃO DOS ITENS DO KIT

Incluir material







Quando inserido um item pelo datamatrix ele será exclusivo deste kit padrão!

Nome do material

Quantidade

OK

Manu(item em manutenção) Temp(item temporário no KIT)

| Item | Manu | Temp | Foto | Nome | Tipo | Datamatrix / RFID | Qtde | Ação |
|--------|------|------|---|-------------------|------|-------------------|------|---|
| 236560 | | |  | COTONETE | 3696 | | 4 |   |
| 236561 | | |  | PINÇA KELLY CURVA | 3225 | | 6 |   |

DÚVIDAS

| Dúvida | Solução | Direito |
|--|--|---------|
| Como editar um kit? | Cada edição contabiliza em uma nova versão do kit, ou seja, um momento kit não será editado, e sim elaborada uma nova versão do mesmo. | - |
| Não visualizo o campo para tornar o patrimônio não rastreável. | Usuário sem direitos. Procure o ADM (administrador) da unidade para liberar o direito "DEFINIR PATRIMONIO COMO NAO RASTREAVEL *CME". | 667 |

Configurações básicas para Operador CME

Consulte este documento para compreender como configurar o crachá de um usuário Operador CME a partir de um usuário de Gerência CME.

MÓDULO

Gestão de Esterilização.


CAMINHO PADRÃO

Menu Cadastro -> Usuário

CONFIGURAÇÃO

A partir da listagem de usuários:

1. Localize o operador que deseja realizar o cadastro do crachá;
2. No campo "crachá", faça a identificação via leitor de código de barras ou informando o número do código do crachá do colaborador.
3. Na mesma tela realize a liberação do direito: "220 - ARSENAL CANCELAR INFORMACAO DE USO DE KIT";
4. Clique em salvar.

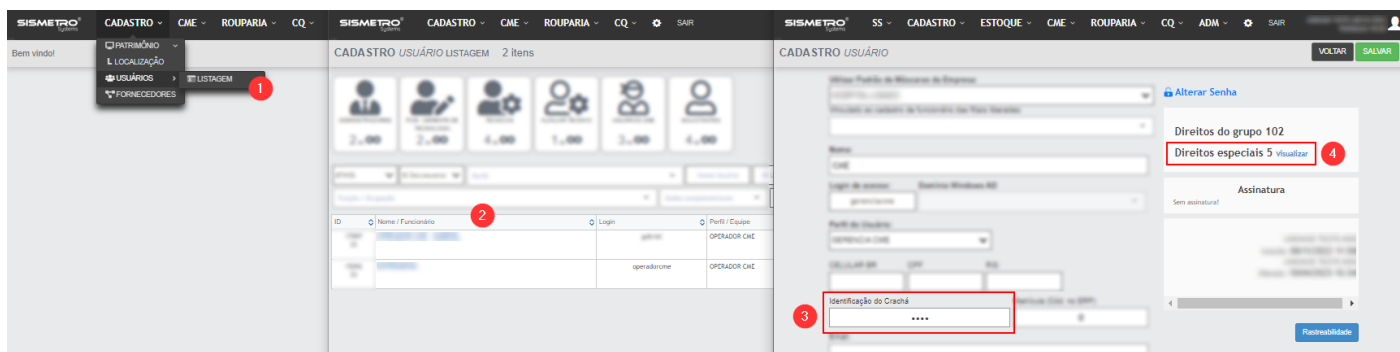

Clique para ampliar

DÚVIDAS

| Dúvida | Solução | Direito |
|---|---|---------|
| Não consigo realizar o cadastro de usuários. | Usuário sem direitos. Solicite ao administrador da sua unidade para que faça a liberação do direito especial "CADASTRAR USUARIO". | 17 |
| Como faço para liberar direitos especiais aos usuários? | Caso tenha dúvidas sobre este tópico clique aqui para saber mais. | - |