

Configuração de Kit Padrão travado por Data Matrix

Criação e configuração de KIT Padrão com instrumental travado por Data Matrix na plataforma SISMETRO.

MÓDULO

Gestão de Esterilização.

PASSO A PASSO

Tipo de Tecnologia

PINÇA BACKHAUS 13CM

Categoria

MATERIAL CIRURGICO

Observação:

GUT - Gravidade

SEM GRAVIDADE

Filial

MULTILAV - UNIDADE RIBEIRAO PRETO

Solicitante: ?

MOVIMENTAÇÃO

HOSPITAL SAO LUCAS SA 18701

Localização

Filho de ?

Marca:

AD INSTRUMENTOS

ADD

Modelo:

-SEM MODELO-

ADD

Número de Série:

Nosso N° de Patrimônio:

TAG

Data Matrix / EAN

ML003853

TAG de Função

Av. de Qualidade:

BOA

Composição

METAL

Máx. de Esterilizações

1. CADASTRO DO MATERIAL CIRÚRGICO

Caminho no Menu:

Cadastro -> Patrimônio -> Listagem

- 1.1 Cadastrar o material como Patrimônio no Tipo de Tecnologia correspondente ao instrumento;
- 1.2 Selecionar no campo "Solicitante" e "Localização" o cadastro que corresponde como proprietário do material;
- 1.3 Selecionar no campo "Marca" e "Modelo" o cadastro que corresponde ao fabricante do material;
- 1.4 Identificar o adesivo *Data Matrix* do instrumental dentro do cadastro do Patrimônio no campo "Data Matrix / EAN";

1.5 Informar a "Av. de Qualidade" e "Composição" do material;

1.6 Se necessário, configurar o número máximo de esterilizações do material no campo "Máx. de Esterilizações";

1.7 Salvar cadastro.

CME KIT PADRÃO Editando 7791 VOLTAR Salvar versão

Nome do KIT
CAIXA PC LARANJA/MARRON/AMARELA

Solicitante/Proprietário
HOSPITAL SAO LUCAS SA

Localização

Código KIT's especiais Realizar Check final em sala!
NÃO

Primeiro Invólucro Validade em dias
SMS AUTOCLAVE 60

Segundo Invólucro Validade em dias

Terceiro Invólucro Validade em dias

Quarto Invólucro Validade em dias

Embalado pela
EQUIPE DO CME

Armazenado em
MULTILAV ESTERILIZACOES

ARSENAL

Medidas em milímetros
Largura Altura Profundidade Litros
300 700 160 = 33.6

Esterilização: Qualidade dos itens: Kit's prontos no Arsenal
É obrigatória BOA 1 1

Permite divergência Alerta de não pertence ao kit
NÃO PERMITE ITENS ADICIONAIS EXIBIR ALERTA

Impressão da etiqueta
IMPRESSÃO COMPLETA DA ETIQUETA

2.
Versão do KIT
RODRIGO ADAO DE SANTIS
Incluiu: 24/02/2020 12:13
Alterou: 24/02/2020 12:35

Sem Foto Destaque [Gerenciar Fotos](#)

Vincular POP
Solicitante: MULTILAV ESTERILIZACOES
Categoria
POP

☒

[Rastreabilidade](#)

2. CONFIGURAÇÃO DO KIT PADRÃO

Caminho no Menu:

CME -> Kit Padrão -> Adicionar

2.1 Cadastrar a caixa como Kit Padrão de acordo com seus respectivos dados;

2.2 Identificar a micro etiqueta *Data Matrix* do *container* dentro do campo "Código";

2.3 No campo "Permite divergência" selecionar a opção "Não permite itens adicionais";



2.4 No campo "Alerta de não pertence ao kit" selecionar a opção "Exibir alerta";

2.5 Salvar cadastro.

Versão do Kit	Versão dos itens
Corresponde ao cadastro e configurações do Kit padrão	Corresponde aos materiais que compõem o Kit padrão

Para editar a "Versão do Kit", acesse a última versão disponível na janela de seleção.

Para editar a "Versão dos itens", acesse a última versão disponível na janela de seleção ou a opção "Montar Versão"

Foto	ID	Código	Versão do Kit	Dados do KIT Padrão	Solicitante / Proprietário	Ciclo e validade	Check final	Versão dos itens	Status
Sem Foto Destaque	7791		Atual 2	CAIXA PC LARANJA/MARRON/AMARELA EQUIPE DO CME Volume Litros: 33.6	HOSPITAL SAO LUCAS SA	SMS AUTOCLAVE Val: 60 dias			  MONTAR VERSÃO

3. CONFIGURAÇÃO DOS ITENS DO KIT

Caminho no Menu:

CME -> Kit Padrão -> Versão dos itens do Kit -> Selecionar ou montar versão

3.1 Certifique-se que o Kit está editável exibindo o botão "Liberar Versão";

3.2 Utilize o campo "*Data Matrix*" para identificar o código da micro etiqueta do instrumental;

3.3 Após identificar todos os materiais pertencentes ao Kit clique em "Liberar Versão" para que o Kit seja exibido na montagem da embalagem.

Nome do KIT:

CAIXA PC LARANJA/MARRON/AMARELA

Validade em DIAS: Local de embalagem:

60

EQUIPE DO CME

2

Total de itens

Rastreabilidade

.0

Versão dos itens

Liberar Versão

EDITANDO VERSÃO DOS ITENS DO KIT

Incluir material

Nome do material

Quantidade




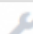


ou

Datamatrix

OK

Quando inserido um item pelo datamatrix ele será exclusivo deste kit padrão!

Manu(item em manutenção) Temp(item temporário no KIT)

Item	Manu	Temp	Nome	Tipo	Datamatrix	Qtde	Ação
147638			PINCA KOCHER RETA 14 CM ID: 315593	355	ML003057		
147636			PINCA KOCHER RETA 14 CM ID: 166684	355	ML005281		

DÚVIDAS

Dúvida	Solução
Como editar um kit?	Cada edição contabiliza em uma nova versão do kit, ou seja, um momento kit não será editado, e sim elaborada uma nova versão do mesmo.

Revisão #12

Criado 24 February 2020 15:40:57 por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado 17 November 2022 20:57:44 por GABRIEL BORGES PETERS